



Glooko[®] Uploader

Notkunarleiðbeiningar – fyrir notendur Glooko



Efnisyfirlit

Tæki fundið	4-5
-------------------	-----

Almennar upplýsingar.....	6
----------------------------------	----------

Vörulýsing.....	6
Fyrirhuguð notkun.....	6
Studd tæki.....	6
Varnaðarorð.....	6
Frábendingar.....	6

Notkunarleiðbeiningar.....	7
-----------------------------------	----------

Sjúklingar.....	8
Innskráning á MyGlooko-stjórnborðið á https://my.glooko.com	8
Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt.....	8
Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð.....	8

Heilbrigðisstarfsfólk.....	9
Óskað eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.....	9
Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt.....	9
Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð.....	9

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk.....	10
Glooko Uploader-hugbúnaðurinn opnaður.....	10
Innskráning á Glooko-reikning.....	10
Eiginleikar Glooko Uploader.....	11
Sykursýkigögnum hlaðið upp.....	12
Sykursýkigögn skoðuð.....	13

Samhæf tæki og sendingaraðferðir.....	14
--	-----------

Tæki fundið



Blóðsykurmælir



Samfelld




sykurnemamæling (CGM)










Insúlíndæla

Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx.....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra.....	14
 Precision Xceed.....	14

 FreeStyle Libre Reader.....	14
 FreeStyle Libre 2 Reader.....	14
 FreeStyle Libre 3 Reader.....	14



Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice.....	14
 On Call® Extra.....	14
 On Call® Extra Voice.....	14
 On Call® Sure.....	14
 On Call® Sure Sync.....	14


Activmed

 GlucoCheck GOLD (TD-4289).....	14
---	----

AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
 Ally BGK.....	14
 Ally GGM.....	14




Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
---	----





















Animas

 OneTouch Ping (pump).....	20
 Vibe.....	20

Arkray

 GlucoCard Shine Connex.....	15
 GlucoCard Shine Express.....	15
 GlucoCard Shine XL.....	15


Ascensia (Bayer)

 Breeze 2.....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link.....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth).....	15
 Contour Next Gen.....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus.....	15
 Contour Plus Blue.....	15
 Contour Plus Elite.....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ.....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4.....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15

Beurer

 GL 44.....	15
 GL 48.....	15
 GL 49.....	15
 GL 60.....	15









Bionime

 Rightest GM700SB.....	15
---	----


Biosys

 Aria.....	15
---	----



Dexcom

 G4 Platinum.....	19
 G4 Platinum with Share.....	19
 G5.....	19
 Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19
 G6 Receiver.....	19
 G7 Receiver.....	19
 One Receiver.....	19
 One+ Receiver.....	19


Diaetesse

 XPER (TD-4289B).....	15
--	----


Ekoweb

 GlucoX (TD-4183).....	16
 GlucoX Pro (TD-4183).....	16


Embrace

 TALK.....	16
---	----


Exacta

 Glance.....	16
---	----

Equil/Wellion

 MICRO-pump.....	21
---	----

ForaCare

 Diamond PRIMA.....	16
--	----

GlucoRx

 Nexus.....	16
 Nexus Mini.....	16
 Q.....	16

GlucoSmart

 Salsa.....	16
 Salsa Connect.....	16














GlucoX

 TD-4183.....	16
--	----



iCare


 PalmDoc II.....	16
---	----


i-SENS

 alphacheck professional.....	16
 CareSens BGM/TEE2.....	16
 CareSens Dual.....	16
 CareSens H Beat.....	16
 CareSens N.....	16
 CareSens N Feliz.....	16
 CareSens N POP.....	16
 CareSens N Premier.....	16
 CareSens N Premier Carelight.....	16
 CareSens N Voice.....	16
 CareSens Pro.....	16
 CareSens S Fit.....	16
 No Coding Plus.....	16
TEE2+.....	16

Infopia	
 Finetest Lite	16

Insulet	
 Omnipod®	21
 Omnipod® Dash™ System	21

Intuity	
 POGO® Automatic™	17

LifeScan	
 OneTouch Select Plus	17
OneTouch Ultra.....	17
OneTouch Ultra Plus Reflect.....	17
OneTouch Ultra2	17
OneTouch UltraEasy.....	17
OneTouch UltraMini	17
OneTouch Verio	17
OneTouch Verio Flex.....	17
OneTouch Verio IQ.....	17
OneTouch Verio Reflect.....	17
OneTouch Verio Sync.....	17

Medtronic	
 630G.....	21
 640G.....	21
 670G.....	21

Menarini	
 GlucoFix Tech	17
Glucomen areo.....	17
Glucomen areo 2K.....	17
Glucomen LX2.....	17

Nipro	
 4SURE Smart	17
4SURE Smart Duo	17

Palmdoc	
 1	17
Smart.....	17


Prodigy	
 AutoCode.....	17


ReliOn	
 Platinum.....	18
Premier Blu.....	18
Premier Classic.....	18
Premier Voice.....	18



Roche	
 Accu-Chek Active.....	17
Accu-Chek Aviva Connect.....	17
Accu-Chek Aviva Combo.....	19
Accu-Chek Aviva Expert.....	19
Accu-Chek Aviva Nano.....	19
Accu-Chek Aviva Plus Black	19
Accu-Chek Aviva Plus Silver	19
Accu-Chek Compact Plus.....	19
Accu-Chek Guide.....	17
Accu-Chek Guide Me.....	17
Accu-Chek Instant.....	17
Accu-Chek Mobile (USB)	17
Accu-Chek Nano.....	19
Accu-Chek Performa	19
Accu-Chek Performa Nano	19

Roche	
 Accu-Chek Aviva Insight	22
Accu-Chek Performa Insight.....	22
Accu-Chek Aviva Solo.....	21
Accu-Chek Guide Solo	21
Accu-Chek Spirit Combo	22

Sanofi	
 BGStar	18

Taidoc	
 TD-4141	18
TD-4183	18
TD-4255	18
TD-4257(v1)	18
TD-4257(v2)	18
TD-4280	18
TD-4285	18
TD-4289	18

Tandem	
 t:flex.....	21
t:slim.....	21
t:slim G4.....	21
t:slim X2	21


Terumo	
 Medisafe Fit Smile	20
 Medisafe WITH.....	20

ViCentra	
 Kaleido.....	21

Trividia (Nipro)	
 TRUE METRIX	17
TRUE METRIX AIR.....	17
TRUResult.....	17
TRUEyou mini.....	17

Wellion	
 Calla Mini.....	18
Galileo Compact.....	18
Leonardo Compact	18

XPER Technology	
 A1 (TD-4183).....	18

Ypsomed	
 Mylife Aveo.....	18

Almennar upplýsingar

Vörulýsing

Glooko-Uploader® er ætlað einstaklingum eða heilbrigðisstarfsfólki á heilbrigðisstofnunum til flutnings forskilgreindra gagna úr heimamælitækjum yfir í gagnagrunn á netþjóni. Tækið má nota eitt sér eða ásamt Glooko-kerfi.

Fyrirhuguð notkun

Glooko System er vettvangur til að stjórna sykursýki sem heilbrigðisstarfsmenn og sjúklingar geta notað á sjúkrahúsi eða að heiman. Það gerir kleift að skoða upplýsingar um sjúklinga frá samhæfum lækningatækjum og öðrum heilbrigðisvöktunartækjum. Það gerir einnig heilbrigðisstarfsfólki kleift að styðja við sykursýkismeðferð með greiningu og eftirliti með sykursýkismeðferð og umönnunaráætlun sjúklings.

Studd tæki

Til að hefjast handa þarf að hafa:

1. Samhæfan blóðsykurmæli, insúlíndælu eða samfellda sykurnemamælingu;
2. PC- eða Mac-tölvu með einu eftirfarandi samhæfra stýrikerfa:
 - Windows 10 (32 bita og 64 bita)
 - Windows 11 (32 bita og 64 bita)
 - macOS 14.0: Sonoma
 - macOS 15.0: Sequoia
 - macOS 26.0: Tahoe
3. Glooko Uploader-hugbúnað;
4. Glooko-reikning; og
5. Snúru fyrir samstillingu eða niðurhal úr tæki sem fylgdi með studda sykursýkitækinu.

Varnaðarorð

Glooko hvorki mælir, túlkar né tekur ákvarðanir um gögnin sem það birtir, því er ekki ætlað að taka sjálfvirkar ákvarðanir um meðferð og það kemur ekki í stað mats heilbrigðisstarfsfólks. Öll sjúkdómsgreining og meðferð skal vera undir eftirliti og umsjón heilbrigðisstarfsfólks.

Ef þú hefur áhyggjur af núverandi greiningu og meðferð við sykursýki skaltu hafa samband við heilbrigðisstarfsmann þinn.

Ef Glooko System er bilað skal hætta að nota vöruna og hafa samband við þjónustudeild Glooko.

Frábendingar


Engin.

Notkunarleiðbeiningar – Glooko Uploader

Þú þarft að stofna Glooko-reikning til að nota Glooko Uploader. Gögn sem hlaðið er upp með Glooko Uploader samstillast við Glooko-reikninginn, sem þú getur fengið aðgang að með innskráningarupplýsingum Glooko. Internettenging (um WiFi eða farsímakerfi) er nauðsynleg til að gögnin samstillist við Glooko-þjóninn.

Sjúklingar:

- Á næstu síðu má finna upplýsingar um uppsetningu og upphleðslu gagna með Glooko Uploader.

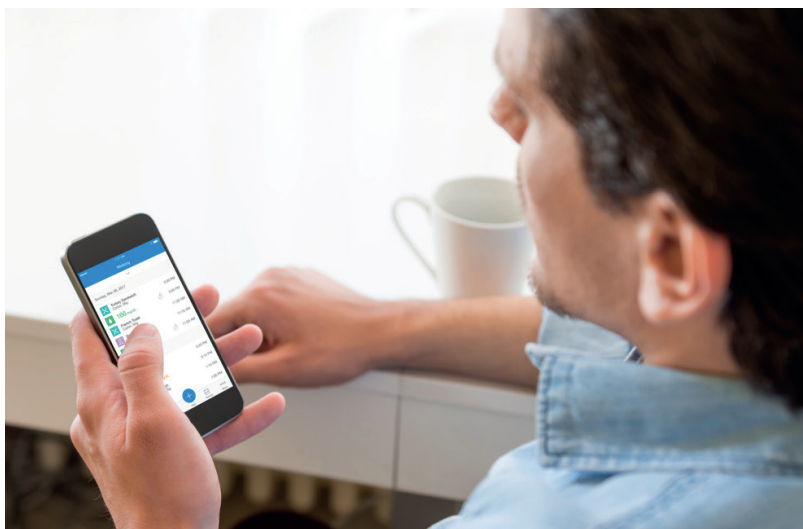

Heilbrigðisstarfsfólk:

- Á síðu 9 má finna upplýsingar um uppsetningu og upphleðslu gagna með Glooko Uploader.



Sjúklingar

Til að fá aðgang að MyGlooko-stjórnborðinu og sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn þarf Glooko-reikning. Þú getur stofnað Glooko-reikning í Glooko-farsímaforritinu fyrir iOS eða Android. Þú getur einnig haft samband við **notendapjónustu Glooko** (<https://support.glooko.com>) til að fá aðstoð við að stofna reikning. Þegar þú hefur stofnað Glooko-reikning skaltu fylgja leiðbeiningunum hér að neðan.

1 Innskráning á MyGlooko-stjórnborðið á <https://my.glooko.com>

- Færðu inn netfang og aðgangsorð.
- Ýttu á „Sign In“ (skrá inn).


AÐSTOÐ VIÐ INNSKRÁNINGU Á GLOOKO-REIKNING

• GLEÝMT AÐGANGSORÐ:

Ef þú manst ekki aðgangsorðið sem þú þarft til að skrá þig inn skaltu ýta á **Forgot Password** (gleymt aðgangsorð) til að fá aðgangsorð sent í tölvupósti. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þú getur einnig haft samband við notendapjónustu Glooko til að fá aðstoð.

• REIKNINGUR OPNAÐUR:

Ef þú færðir inn rangt aðgangsorð fimm sinnum læsist reikningurinn. Þá verða leiðbeiningar um opnun reikningsins sjálfkrafa sendar á netfang reikningsins. Ef þú færð ekki tölvupóst skaltu smella á **Didn't receive unlock instructions** (fékk ekki leiðbeiningar um opnun) til að fara á opnunarsíðuna. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þú getur einnig haft samband við notendapjónustu Glooko til að fá aðstoð.

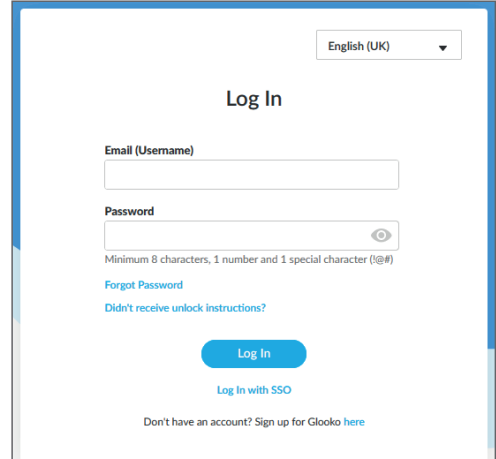

2 Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt

Þegar þú hefur skráð þig inn á MyGlooko-stjórnborðið þarftu að sækja uppsetningarskrána.

- Ýttu á **Settings** (stillingar).
- Flettu neðst á síðuna og smelltu á **Get Glooko Uploader** (sækja Glooko Uploader).
- Þá opnast skjár með hnöppum til að setja upp Glooko Uploader í Mac- eða PC-tölvu. Smelltu á hnappinn Mac eða PC til að sækja uppsetningarskrána.



3 Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð

Þú gætir þurft að leita að uppsetningarskránni sem hlaðið er niður, eða hugsanlega opnast sprettigluggi sem býður þér að keyra skrána, allt eftir því hvaða vafra og stýrikerfi þú notar.

- Ef þú ert að nota **PC**-tölvu skaltu athuga möppu með nýlegu niðurrhali
- Ef þú ert að nota **Mac**-tölvu skaltu athuga niðurrhalsmöppuna í Finder

Þegar þú hefur fundið skrána skaltu tvísmella á hana og fylgja uppsetningarleiðbeiningunum á skjánum. Þú þarft að endurræsa tölvuna í lok uppsetningarferlisins.

ATHUGIÐ: Fyrir FreeStyle Libre notendur í Svíþjóð, Noregi og Bandaríkjunum er mikilvægt að velja að þú sért að nota FreeStyle Libre meðan á uppsetningarferlinu stendur. Þetta mun setja upp viðbótar FreeStyle Libre DataHub sem þarf fyrir þessar upphleðslur.

Heilbrigðisstarfsfólk

Til að nota Glooko Uploader-hugbúnaðinn þarf Glooko-reikning fyrir heilbrigðisstarfsfólk og áskrift sem styður Glooko Uploader. Einnig þarf sérstakan tengil til að sækja Glooko Uploader. Hafðu samband við notendajónustu Glooko (<https://support.glooko.com>) til að fá aðstoð.

1 Óskað eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að óska eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.

- Hafðu samband við notendajónustu Glooko (<https://support.glooko.com>) til að óska eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.

2 Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt

- Þegar þú færð tengil til að sækja hugbúnaðinn frá Glooko skaltu smella á tengilinn í tölvupóstinum. Þá opnast skjár með hnöppum til að setja upp Glooko Uploader í Mac- eða PC-tölvu. Smelltu á hnappinn Mac eða PC til að sækja uppsetningarskrána.



3 Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð

Þú gætir þurft að leita að uppsetningarskránni sem hlaðið er niður, eða hugsanlega opnast sprettigluggi sem býður þér að keyra skrána, allt eftir því hvaða vafra og stýrikerfi þú notar.

- Ef þú ert að nota **PC**-tölvu skaltu athuga möppu með nýlegu niðurrhali
- Ef þú ert að nota **Mac**-tölvu skaltu athuga niðurrhalsmöppuna í Finder

Þegar þú hefur fundið skrána skaltu tvísmella á hana og fylgja uppsetningarleiðbeiningunum á skjánum. Þú þarft að endurræsa tölvuna í lok uppsetningarferlisins.

ATHUGIÐ: Fyrir FreeStyle Libre notendur í Svíþjóð, Noregi og Bandaríkjunum er mikilvægt að velja að þú sért að nota FreeStyle Libre meðan á uppsetningarferlinu stendur. Þetta mun setja upp viðbótar FreeStyle Libre DataHub sem þarf fyrir þessar upphleðslur.

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

Þegar Glooko Uploader hefur verið sett upp og tölvun hefur verið endurræst finnurðu tákni Glooko Uploader annaðhvort á skjáborðinu í PC-tölvu eða í möppunni „Applications“ (forrit) í Mac-tölvu.

4 Glooko Uploader-hugbúnaðurinn opnað

- **Finndu** tákni Glooko Uploader á skjáborðinu í PC-tölvu eða í möppunni „Applications“ (forrit) í Mac-tölvu.
- **Tvísmelltu** á tákni Glooko Uploader til að ræsa forritið.

ATHUGIÐ: Endurræstu tölvuna áður en þú ræsir Glooko Uploader í fyrsta sinn.



5 Innskráning á Glooko-reikning

Þegar Glooko Uploader-forritið opnast þarftu að skrá þig inn á Glooko-reikninginn þinn.

- Færðu inn **netfangið eða notandanafnið þitt**
- Færðu inn **aðgangsorð**
- Ýttu á **Sign In** (skrá inn).

AÐSTOÐ VIÐ INNSKRÁNINGU Á GLOOKO-REIKNING

Ef þú manst ekki aðgangsorðið sem þú þarft til að skrá þig inn skaltu smella á **Forgot Password** (gleymt aðgangsorð) til að fá aðgangsorð sent í tölvupósti. Þú getur einnig haft samband við notendabjónustu Glooko til að fá aðstoð.

EINNSKRÁNING (SSO) FYRIR HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK


Einskráning gerir heilbrigðisstarfsfólki kleift að skrá sig inn með gildandi öruggri auðkenningarþjónustu viðkomandi sjúkrastofnunar (auðkennisveita).

1. Smelltu á valkostinn „Skráðu þig inn með einskráningu“ neðst í innskráningarglugganum.
2. Þú verður flutt(ur) á Glooko Web þar sem þú þarft að slá inn netfangið sem tengist Glooko-reikningnum þínum.
3. Glooko mun eiga samskipti við kerfi sjúkrastofnunarinnar til að bera kennsl á auðkennisveituna þína og þú verður flutt(ur) á viðkomandi innskráningarsíðu.
4. Skráðu þig inn með þínum venjulegu innskráningargögnum fyrir viðkomandi auðkennisveitu.
5. Þegar kerfi sjúkrastofnunarinnar hefur staðfest auðkenni þitt verður þú flutt(ur) aftur á skjá Glooko Uploader til að halda upphleðslu tækisins áfram.


Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk


6 Eiginleikar Glooko Uploader

ÚTSKRÁNING AF REIKNINGI


- Þú getur skráð þig út af Glooko-reikningnum með því að ýta á notandahnappinn  neðst til hægri í Glooko Uploader.
- Ýttu á **Log out** (skrá út)


NOTANDAUPPLÝSINGAR SKOÐAÐAR

- Þú getur skoðað notandaupplýsingar þínar með því að ýta á notandahnappinn  neðst til hægri í Glooko Uploader.
- Þessi sprettigluggi inniheldur:
 - o **Nafn** þitt
 - o **Heimilaðan aðalnotkunarstað** (heilbrigðisstarfsfólk) og tengdan **ProConnect-kóða**
 - o **Netfangið** þitt
- Ýttu á **Log out** (skrá út).

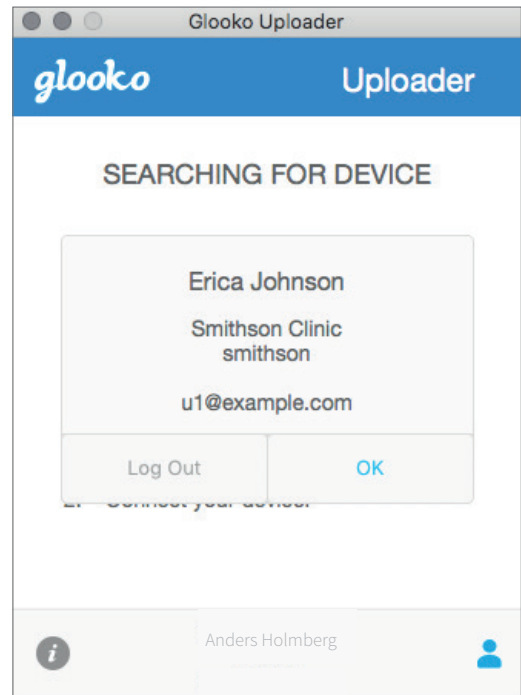

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM GLOOKO UPLOADER

- Þú getur skoðað nánari upplýsingar með því að ýta á upplýsingahnappinn  neðst til vinstri í Glooko Uploader.
- Í þessum sprettiglugga eru upplýsingar um notendapjónustu, vörulýsing og yfirlýsing um fyrirhugaða notkun.

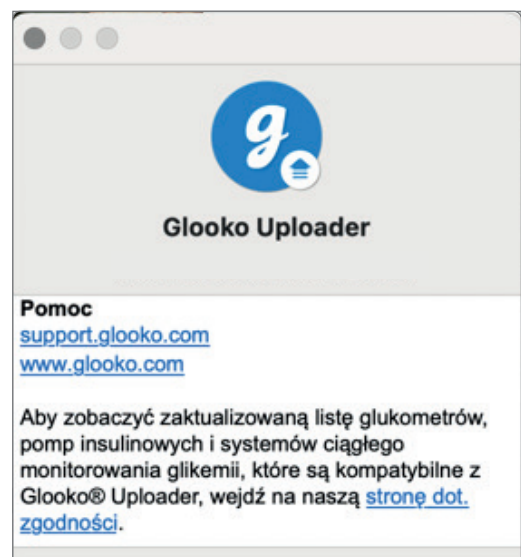

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk


7 Sykursýkigögnum hlaðið upp

Þegar þú hefur skráð þig inn í Glooko Uploader getur þú hlaðið upp gögnum úr sykursýkitækinu.

SNÚRA SYKURSÝKITÆKIS TENGD VIÐ TÖLVU

Eftir innskráningu byrjar Glooko Uploader að leita að tæki.

- Tengdu viðeigandi USB-snúru eða snúru innrauðrar tengingar sykursýkitækisins við tölvuna.
- Þegar tölvan hefur greint snúruna skaltu bíða í nokkrar sekúndur þar til reklar snúrunnar greinast áður en þú tengir tækið.

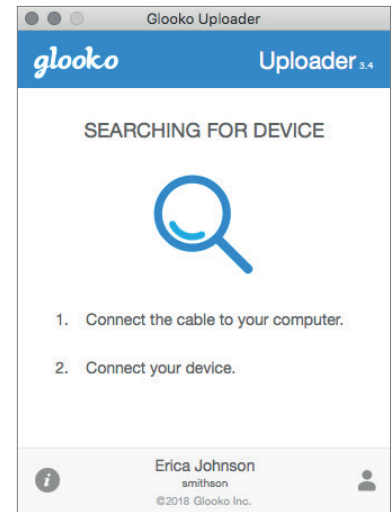


SYKURSÝKITÆKIÐ TENGT VIÐ SNÚRUNA

- Þegar snúran hefur verið tengt við tölvuna skaltu tengja sykursýkitækið við snúruna.

ATHUGIÐ: Gakktu úr skugga um að þú notir snúruna sem fylgdi sykursýkitækinu þínu. Ef þú þarft að fá nýja snúru skaltu hafa samband við framleiðanda sykursýkitækisins.

- Þegar þú hefur tengt sykursýkitækið við tölvuna með snúrunni sem fylgdi með tækinu byrjar tækið að hlaða upp gögnum með Glooko Uploader.
- Ef villa kemur upp skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum til að leysa úr henni. Ef erfiðleikar eru viðvarandi skaltu hafa samband við notendabjónustu Glooko til að fá aðstoð.

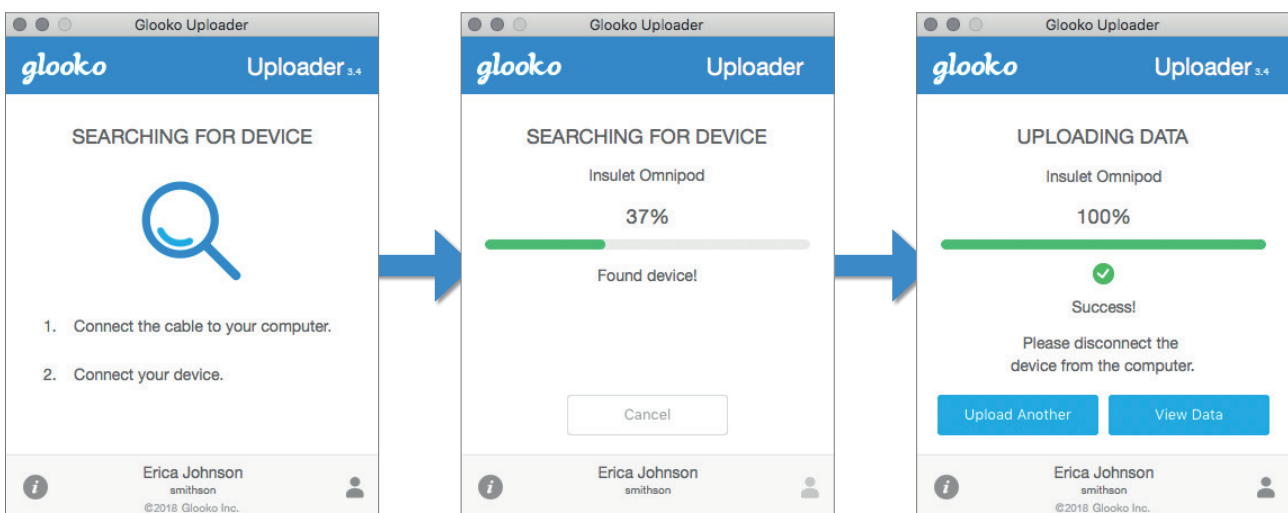

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

8 Sykursýkigögn skoðuð

Þegar gögnum hefur verið hlaðið upp úr sykursýkitækini með Glooko Uploader geturðu skoðað gögnin á <https://my.glooko.com> með því að skrá þig inn á Glooko-reikninginn.

- **Sjúklingar:**

Nánari upplýsingar um vefstjórnborð MyGlooko fást í

[Glooko for Personal Use - Quick Start Guide](#)
á <https://support.glooko.com>

- **Heilbrigðisstarfsfólk:**


Nánari upplýsingar um Population Tracker er að finna í:

[Glooko for Clinics - Quick Start Guide](#)
á <https://support.glooko.com>



Samhæfð tæki og sendingaraðferðir

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvernig sykursýkigögnum er hlaðið upp til Glooko með Glooko® Uploader. Ef sérstakar leiðbeiningar fylgja ekki um upphleðslu fyrir tækið þarf aðeins að tengja það við PC-/Mac-tölvuna með USB-snúru tækisins og þá er gögnunum hlaðið upp sjálfkrafa.

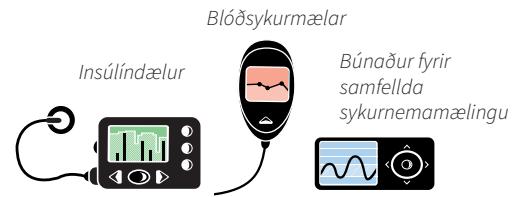

i Vinsamlegast athugaðu að sum sykursýkistækjanna eru hugsanlega ekki fánleg á þínum markaði.

Blóðsykurmælur – tengdir með USB-snúru

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)




FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Abbott Xceed
USB

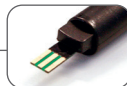

FreeStyle Libre Reader
FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader

Micro USB



Acon Laboratories

On Call® Express
On Call® Express II
On Call® Express Voice
On Call® Extra | On Call® Extra Voice
On Call® Sure
On Call® Sure Sync

On Call USB
(2,5 mm)



Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289)

Micro USB



Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Ally BGK

Micro USB



Ally BGM

i-Sens USB
(2,5 mm)



Animas

OneTouch Ping (meter)

Mini USB




Samhæfi er takmarkað við Svíþjóð, Noreg og Bandaríkin frá Abbott.


ATHUGIÐ: Vertu viss um að velja að þú sért að nota FreeStyle Libre meðan á uppsetningarferlinu á Glooko Uploader hugbúnaðinum stendur. Þetta mun setja upp viðbótar FreeStyle Libre DataHub sem þarf fyrir þessar upphleðslur.

1. Tengdu við tölvuna.
2. Ýttu á afrofa mælisins.


Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

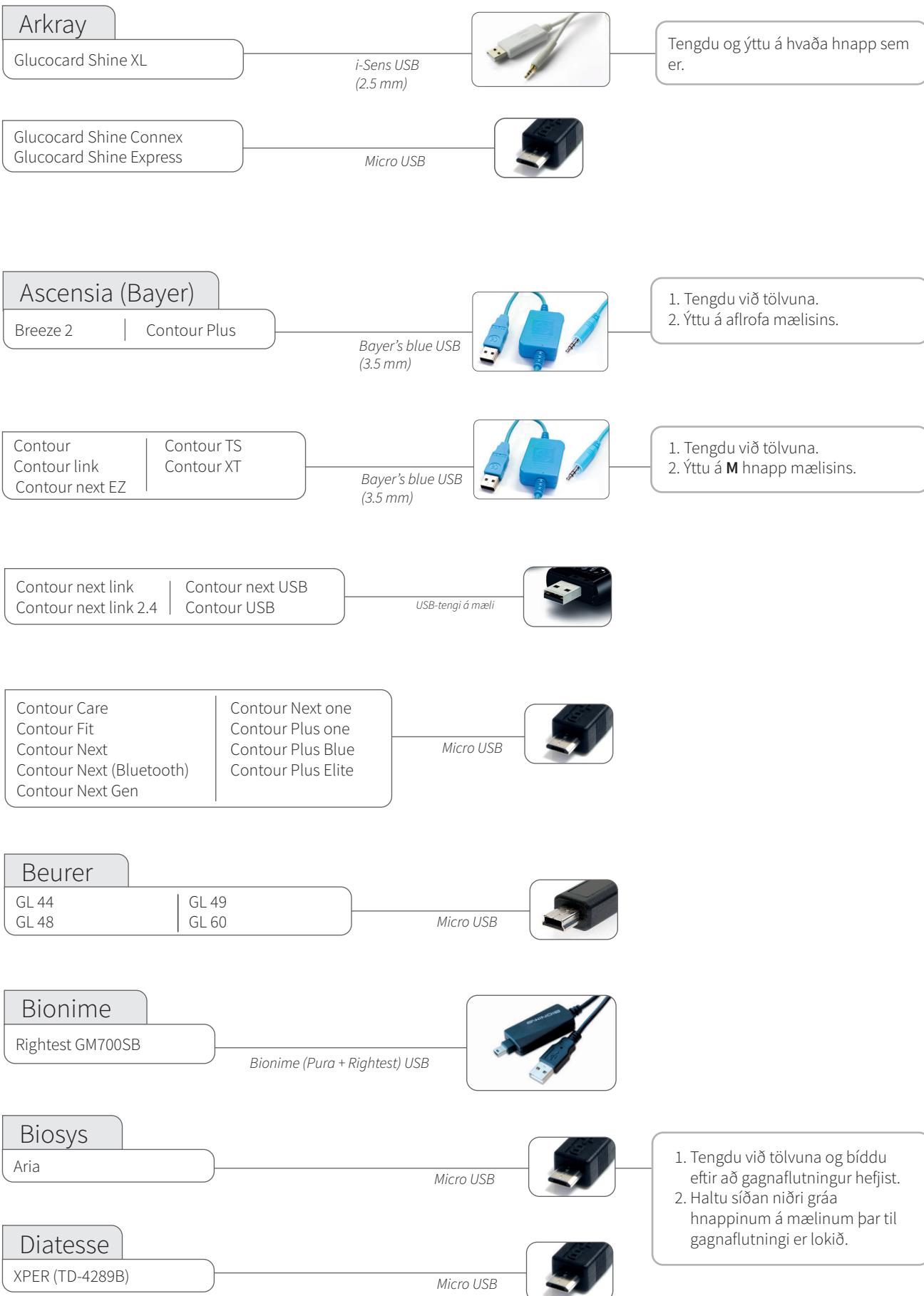


Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

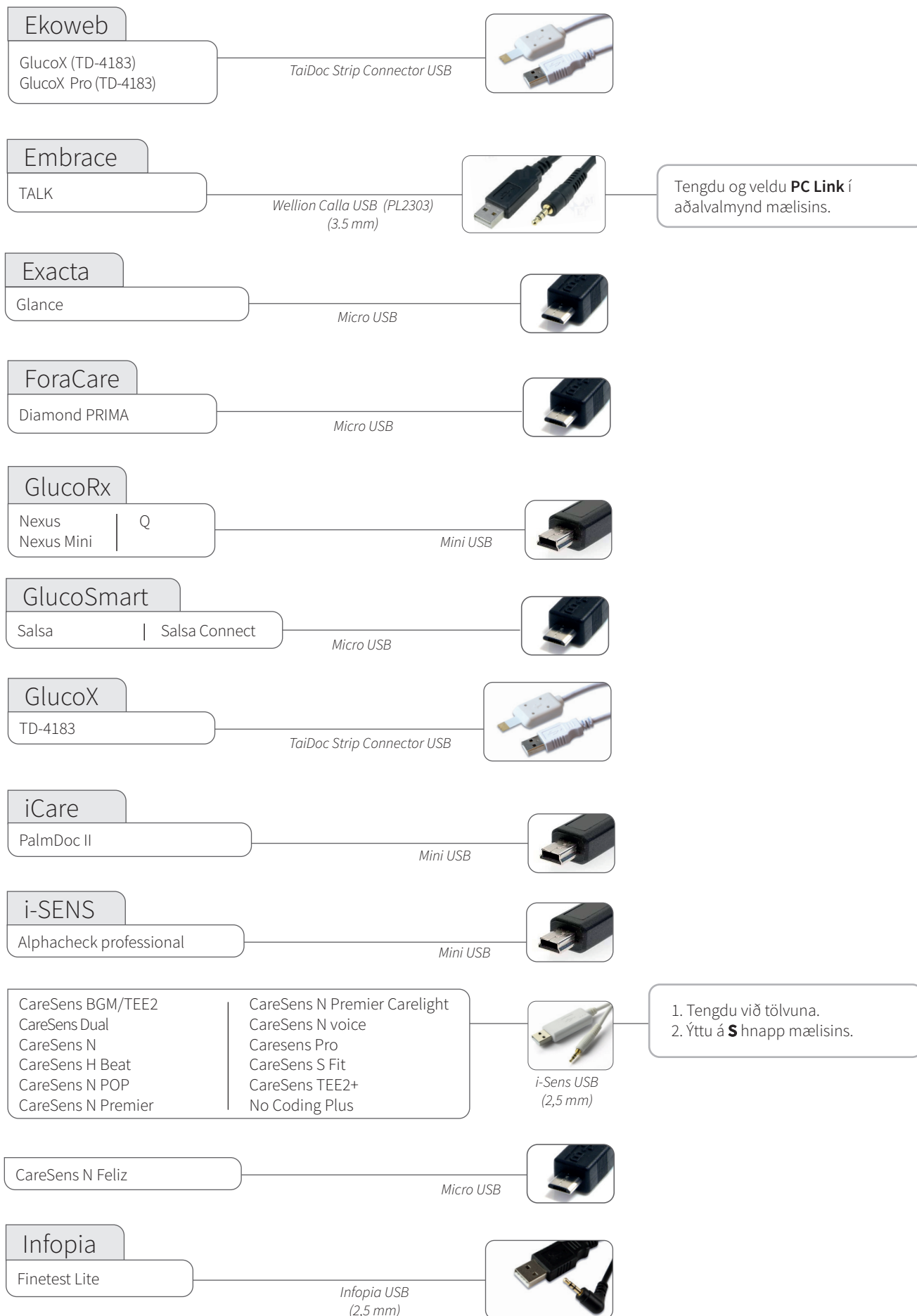

Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

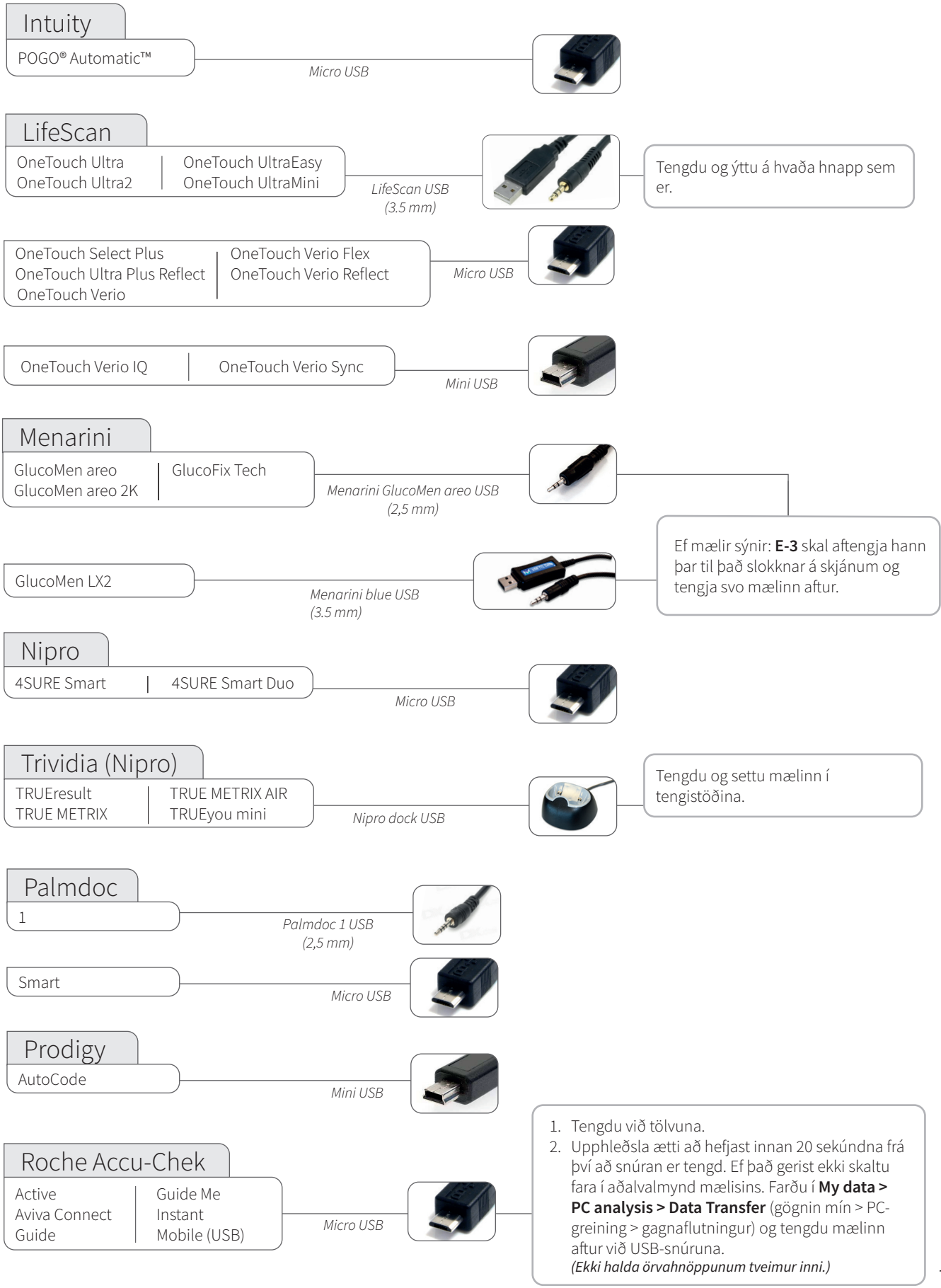

Blóðsykurmælur – tengdir með USB-snúru

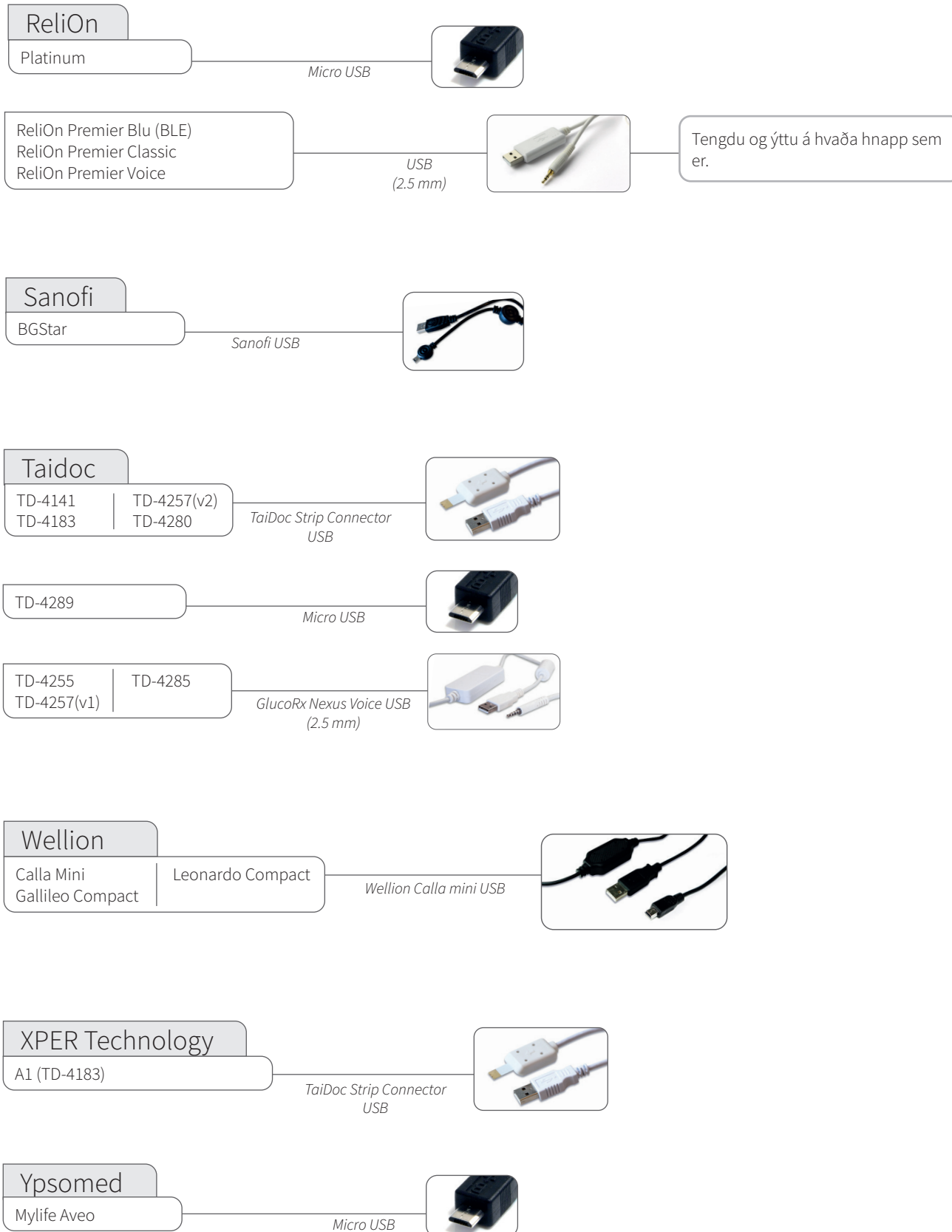

Blóðsykurmælar – með innrauðri tengingu



Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTISYS Li, Li2 eða Accu-Chek 360°

1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.
2. Þegar slökkt er á mælinum skal virkja innrauða sendingu með því að ýta á og halda inni örvahnöppunum tveimur þar til tvær örvar birtast á skjánum.

Accu-Chek Compact Plus



ACTISYS Li, Li2 eða Accu-Chek 360°

1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.
2. Virkjaðu innrauða sendingu með því að halda inni hnöppunum **S** og **M** fyrir neðan skjáinn þar til tvær örvar birtast á skjánum.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTISYS Li, Li2 eða Accu-Chek 360°

1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.
2. Í aðalvalmyndinni skaltu fara í **My data** (gögnin mín) og velja **Data transfer** (gagnaflutningur).

Samfelld sykurnemamæling – tengd með USB-snúru

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB




Ef upphleðslan hefst ekki skaltu aftengja móttakarann og velja Shutdown (slökkva) í valmyndinni til að slökkva á móttakanum. Kveiktu aftur á móttakanum og tengdu hann við tölvuna.

Blood glucose meters and Insulin pumps - with NFC connection

Terumo


Medisafe Fit Smile



1. Tengdu NFC plötuna frá Terumo við tölvuna þína.
2. Settu mælinn ofan á NFC plötuna.

Athugið að útsendingartáknið aftan á mælinum þarf að vera í takt við NFC táknið á NFC plötunni.

Medisafe WITH



1. Tengdu NFC plötuna frá Terumo við tölvuna þína.
2. Gakktu úr skugga um að aðalvalmyndin birtist á fjarstýringunni fyrir dæluna.
3. Settu fjarstýringuna ofan á NFC plötuna.

Vinsamlegast athugaðu að útsendingartáknið aftan á fjarstýringunni þarf að vera í takt við NFC táknið á NFC plötunni.

Insúlíndætur – með innrauðri tengingu

Animas (IR)





OneTouch Ping Vibe




1. Stöðvaðu dæluna. (MAIN MENU (aðalvalmynd), flettu á **Suspnd/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi); **Suspend** (stöðva) er auðkennt).
2. Ýttu á **OK** (í lagi).
3. Settu bakhlið dælnunnar að Actisys-snúru þráðlauss niðurhals með innrauðri tengingu.
4. Þegar sendingu er lokið: Settu dæluna aftur í gang (MAIN MENU (aðalvalmynd), flettu á **Suspnd/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi); **Resume** (halda áfram) er auðkennt). Ýttu á **OK** (í lagi).


ACTISYS Li2 snúra
Athugið! Ef þú notar Windows 8 eða 10 þarftu að nota ACTISYS Li2-snúruna.

Samhæfar innrauðar snúrir

<p>ACTiSYS - Li-snúra</p>  <p>Samhæf stýrikerfi: macOS X: 10.14–12.0 Windows: Á ekki við</p>	<p>ACTiSYS - Li2-snúra</p>  <p>Samhæf stýrikerfi: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Accu-Chek - 360°snúra (Realtyme)</p>  <p>Samhæfð stýrikerfi: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Roche Accu-Chek Smart Pix 2-snúra</p>  <p>Samhæfð stýrikerfi: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>
---	---	--	--

 **Vantar snúru?**
Hafðu samband við framleiðanda sykursýkitækisins.

Insúlíndætur – tengdar með USB-snúru

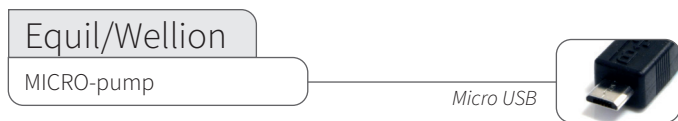


1. Tengdu og ýttu á aflrofa PDM-tækisins.
2. Taktu PDM-tækið úr lás og ýttu á „Export“ (flytja út) á skjánum.



1. Tengdu Contour Next Link 2,4 metra við eitt af USB-tengjum tölvunnar.
2. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum sem fram koma í Glooko Uploader til að hlaða upp gögnum úr Medtronic-dællunni þinni.



1. Opnaðu Aðalvalmyndina á handeiningunni fyrir dæluna.
2. Veldu USB í Aðalvalmyndinni.
3. Tengdu handeininguna við tölvuna með Micro USB snúrunni.

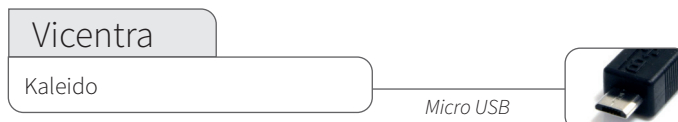

Farðu í gulu valmyndina og veldu gagnasendingu.

Insúlíndælar – tengdar með innrauðum snúrum

Samhæfar innrauðar snúrir


Roche Accu-Chek Smart Pix-snúra



Roche Accu-Chek Smart Pix 2-snúra



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight

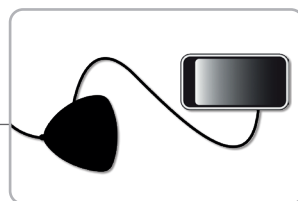

Smart Pix 2
Athugið! Tengdu fjarstýringu dælnnar með micro USB-snúru við Smart Pix 2.

1. Tengdu Smart Pix 2-snúruna við tölvuna og bíddu þar til bláa gaumljósið á Smart Pix 2 byrjar að blikka hægt.
2. Tengdu fjarstýringuna við Smart Pix 2 með micro USB-snúru.
3. Í valmynd fjarstýringarinnar skaltu velja **Connect to PC** (tengja við PC-tölvu) og ýta á **OK** (í lagi).
4. Tryggðu að dælan sé í námunda við fjarstýringuna.
5. Bláa gaumljósið á Smart Pix 2 logar meðan gögn eru send úr tækinu í Smart Pix 2.
6. Það slökknar á bláa gaumljósinu og bæði Smart Pix 2 og tækið gefa frá sér hljóð til merkis um að verið sé að senda gögnin úr Smart Pix 2 í Glooko Uploader. Ekki aftengja Smart Pix 2 strax!
7. Bíddu þar til Glooko Uploader staðfestir að upphleðslan hafi tekist.


Roche
Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix eða Smart Pix 2
Athugið! Nauðsynlegt er að hafa Smart Pix hugbúnaðarútgáfu 3.02 eða nýrri þegar Smart Pix er notað.

1. Tengdu Smart Pix við tölvuna og bíddu eftir að bláa gaumljósið í Smart Pix byrji að blikka hægt.
2. Settu dæluna í **gagnaflutningsstillingu** (stoppaðu dæluna og farðu í Data Transfer (**gagnaflutningur** valmyndina).
3. Settu dæluna með IR-augað í átt að Smart Pix. Bláa gaumljósið sýnir að gögn eru flutt til Smart Pix.
4. Bíddu eftir að bláa gaumljósið byrji að blikka hægt aftur eða hætti alveg að blikka.
5. Nú eru gögnin að flytjast frá Smart Pix til Glooko Uploader. Ekki taka Smart Pix úr sambandi strax!
6. Bíddu eftir að Glooko Uploader sýni að upphleðsla gagnanna hafi heppnast.



 Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Notendapjónusta
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>