



# Glooko<sup>®</sup> Uploader

Návod na použitie – pre používateľov systému Glooko



# Obsah

Vyhľadanie zariadenia.....	4 – 5
<b>Všeobecné informácie.....</b>	<b>6</b>
Opis výrobku.....	6
Zamýšľané použitie.....	6
Podporované zariadenia.....	6
Výstrahy.....	6
Kontraindikácie.....	6
<b>Návod na použitie .....</b>	<b>7</b>
Pacienti .....	8
Prihlásenie sa na tabuli Dashboard v MyGlooko na adrese <a href="https://my.glooko.com">https://my.glooko.com</a> .....	8
Stiahnutie inštalačného súboru softvéru .....	8
Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie.....	8
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.....	9
Vyžiadanie prepojenia na stiahnutie softvéru Glooko Uploader .....	9
Stiahnutie inštalačného súboru softvéru .....	9
Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie.....	9
Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti .....	10
Spustenie softvéru Glooko Uploader .....	10
Prihlásenie sa do účtu Glooko .....	10
Funkcie v softvéri Glooko Uploader.....	11
Nahratie údajov o ochorení diabetes.....	12
Zobrazenie údajov o ochorení diabetes.....	13
<b>Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy.....</b>	<b>14</b>

# Vyhľadanie zariadenia



Glukomer













CGM










Inzulínová pumpa

## Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx.....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra.....	14
 Precision Xceed.....	14
 FreeStyle Libre Reader.....	14
 FreeStyle Libre 2 Reader.....	14
 FreeStyle Libre 3 Reader.....	14



## Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice.....	14
 On Call® Extra.....	14
 On Call® Extra Voice.....	14
 On Call® Sure.....	14
 On Call® Sure Sync.....	14


## Activmed

 GlucoCheck GOLD (TD-4289).....	14
---	----


## AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
 Ally BGK.....	14
 Ally GGM.....	14




## Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
---	----





















## Animas

 OneTouch Ping (pump).....	20
 Vibe.....	20

## Arkray

 GlucoCard Shine Connex.....	15
 GlucoCard Shine Express.....	15
 GlucoCard Shine XL.....	15


## Ascensia (Bayer)

 Breeze 2.....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link.....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth).....	15
 Contour Next Gen.....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus.....	15
 Contour Plus Blue.....	15
 Contour Plus Elite.....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ.....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4.....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15

## Beurer

 GL 44.....	15
 GL 48.....	15
 GL 49.....	15
 GL 60.....	15









## Bionime

 Rightest GM700SB.....	15
---	----


## Biosys

 Aria.....	15
---	----



## Dexcom

 G4 Platinum.....	19
 G4 Platinum with Share.....	19
 G5.....	19
 Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19
 G6 Receiver.....	19
 G7 Receiver.....	19
 One Receiver.....	19
 One+ Receiver.....	19


## Diatesse

 XPER (TD-4289B).....	15
--	----


## Ekoweb

 GlucoX (TD-4183).....	16
 GlucoX Pro (TD-4183).....	16


## Embrace

 TALK.....	16
---	----


## Exacta

 Glance.....	16
---	----

## Equil/Wellion

 MICRO-pump.....	21
---	----

## ForaCare

 Diamond PRIMA.....	16
--	----

## GlucoRx

 Nexus.....	16
 Nexus Mini.....	16
 Q.....	16

## GlucoSmart

 Salsa.....	16
 Salsa Connect.....	16















## GlucoX

 TD-4183.....	16
--	----


## iCare


 PalmDoc II.....	16
---	----












## i-SENS

 alphacheck professional.....	16
 CareSens BGM/TEE2.....	16
 CareSens Dual.....	16
 CareSens H Beat.....	16
 CareSens N.....	16
 CareSens N Feliz.....	16
 CareSens N POP.....	16
 CareSens N Premier.....	16
 CareSens N Premier Carelight.....	16
 CareSens N Voice.....	16
 CareSens Pro.....	16
 CareSens S Fit.....	16
 No Coding Plus.....	16
 TEE2+.....	16

<b>Infopia</b>	
 Finetest Lite .....	16


<b>Insulet</b>	
 Omnipod® .....	21
 Omnipod® Dash™ System .....	21

<b>Intuity</b>	
 POGO® Automatic™ .....	17

<b>LifeScan</b>	
 OneTouch Select Plus .....	17
 OneTouch Ultra .....	17
 OneTouch Ultra Plus Reflect .....	17
 OneTouch Ultra2 .....	17
 OneTouch UltraEasy .....	17
 OneTouch UltraMini .....	17
 OneTouch Verio .....	17
 OneTouch Verio Flex .....	17
 OneTouch Verio IQ .....	17
 OneTouch Verio Reflect .....	17
 OneTouch Verio Sync .....	17

<b>Medtronic</b>	
 630G .....	21
 640G .....	21
 670G .....	21















<b>Menarini</b>	
 GlucoFix Tech .....	17
 GlucoMen areo .....	17
 GlucoMen areo 2K .....	17
 GlucoMen LX2 .....	17


<b>Nipro</b>	
 4SURE Smart .....	17
 4SURE Smart Duo .....	17

<b>Palmdoc</b>	
 1 .....	17
 Smart .....	17









<b>Prodigy</b>	
 AutoCode .....	17





<b>ReliOn</b>	
 Platinum .....	18
 Premier Blu .....	18
 Premier Classic .....	18
 Premier Voice .....	18



<b>Roche</b>	
 Accu-Chek Active .....	17
 Accu-Chek Aviva Connect .....	17
 Accu-Chek Aviva Combo .....	19
 Accu-Chek Aviva Expert .....	19
 Accu-Chek Aviva Nano .....	19
 Accu-Chek Aviva Plus Black .....	19
 Accu-Chek Aviva Plus Silver .....	19
 Accu-Chek Compact Plus .....	19
 Accu-Chek Guide .....	17
 Accu-Chek Guide Me .....	17
 Accu-Chek Instant .....	17
 Accu-Chek Mobile (USB) .....	17
 Accu-Chek Nano .....	19
 Accu-Chek Performa .....	19
 Accu-Chek Performa Nano .....	19

<b>Roche</b>	
 Accu-Chek Aviva Insight .....	22
 Accu-Chek Performa Insight .....	22
 Accu-Chek Aviva Solo .....	21
 Accu-Chek Guide Solo .....	21
 Accu-Chek Spirit Combo .....	22

<b>Sanofi</b>	
 BGStar .....	18

<b>Taidoc</b>	
 TD-4141 .....	18
 TD-4183 .....	18
 TD-4255 .....	18
 TD-4257(v1) .....	18
 TD-4257(v2) .....	18
 TD-4280 .....	18
 TD-4285 .....	18
 TD-4289 .....	18

<b>Tandem</b>	
 t:flex .....	21
 t:slim .....	21
 t:slim G4 .....	21
 t:slim X2 .....	21


<b>Terumo</b>	
 Medisafe Fit Smile .....	20
 Medisafe WITH .....	20

<b>ViCentra</b>	
 Kaleido .....	21

<b>Trividia (Nipro)</b>	
 TRUE METRIX .....	17
 TRUE METRIX AIR .....	17
 TRUResult .....	17
 TRUEyou mini .....	17

<b>Wellion</b>	
 Calla Mini .....	18
 Galileo Compact .....	18
 Leonardo Compact .....	18

<b>XPER Technology</b>	
 A1 (TD-4183) .....	18

<b>Ypsomed</b>	
 Mylife Aveo .....	18

# Všeobecné informácie

## Opis výrobku

Softvér Glooko Uploader® je určený pre jednotlivcov alebo zdravotníckych pracovníkov v domácnosti alebo v zdravotníckych zariadeniach na prenos preddefinovaných údajov z domácich monitorovacích zariadení do serverovej databázy. Zariadenie sa môže používať ako samostatný produkt alebo v kombinácii so systémom Glooko.

## Zamýšľané použitie

Systém Glooko je platforma na správu diabetu, ktorú môžu zdravotnícki pracovníci a pacienti používať v ambulancii alebo na diaľku. Umožňuje zobrazovať údaje pacienta z kompatibilných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení na monitorovanie zdravia. Umožňuje tiež zdravotníckym pracovníkom podporovať liečbu diabetu prostredníctvom analýzy a monitorovania liečby diabetu a programu starostlivosti o pacienta.

## Podporované zariadenia

Jednotlivci budú na začiatok potrebovať tieto súčasti:

1. kompatibilný glukomer, inzulínovú pumpu alebo systém na kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM),
2. PC alebo Mac s jedným z nasledujúcich operačných systémov (OS):
  - Windows 10 (32-bitová verzia a 64-bitová verzia)
  - Windows 11 (32-bitová verzia a 64-bitová verzia)
  - macOS 14.0: Sonoma
  - macOS 15.0: Sequoia
  - macOS 26.0: Tahoe
3. softvér Glooko Uploader,
4. účet Glooko a
5. synchronizačný kábel alebo kábel na sťahovanie údajov, ktorý bol dodaný s podporovaným zariadením pre diabetikov.

## Výstraha!

Glooko nemeria, neinterpretuje ani neprijíma rozhodnutia o údajoch, ktoré prenáša, nie je určený na poskytovanie automatizovaných rozhodnutí o liečbe, ani nenahrádza odborné stanoviská odborníka. Všetky lekárske diagnózy a liečebné postupy sa musia realizovať pod dohľadom príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak máte obavy týkajúce sa vašej súčasnej diagnózy a liečby diabetu, obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V prípade, že Glooko System nepracuje správne, prestaňte produkt používať a obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Glooko.

## Kontraindikácie


Žiadne.

# Návod na použitie – Glooko Uploader

Ak chcete používať softvér Glooko Uploader, musíte si vytvoriť účet Glooko. Údaje nahrané pomocou softvéru Glooko Uploader sa zosynchronizujú s vaším účtom Glooko, ku ktorému máte prístup s prihlasovacími údajmi Glooko. Internet (WiFi alebo mobilná dátová sieť) je potrebný na synchronizáciu údajov so serverom Glooko.

## Pacienti:

- Na nasledujúcej strane si prečítajte, ako nainštalovať a nahráť údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.

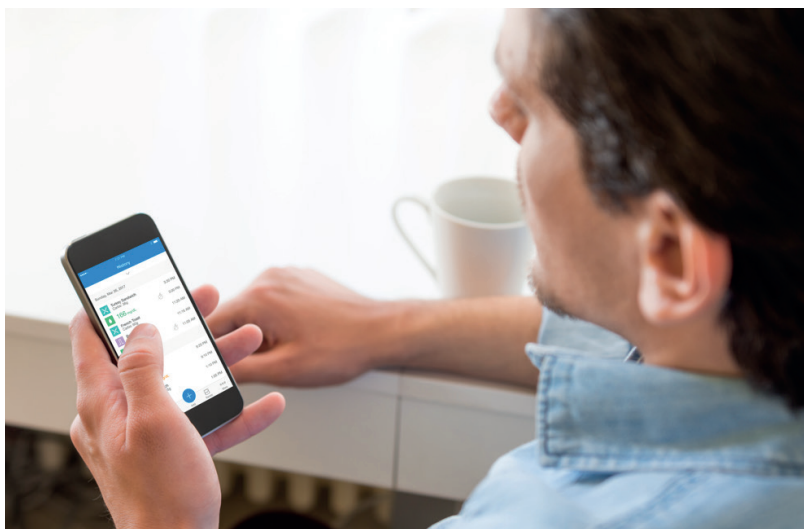

---

## Poskytovatelia zdravotnej

- Na strane 9 si prečítajte, ako nainštalovať a nahráť údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.



# Pacienti

Ak chcete získať prístup k tabuli Dashboard v MyGlooko a stiahnuť softvér Glooko Uploader, budete musieť mať založený účet Glooko. Do služby Glooko sa môžete zaregistrovať pomocou mobilnej aplikácie Glooko pre iOS alebo Android. Ak potrebujete poradiť pri vytváraní účtu, môžete tiež kontaktovať **technickú podporu spoločnosti Glooko** (<https://support.glooko.com>). Po vytvorení účtu Glooko postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

## 1 Prihláste sa na tabuli Dashboard v MyGlooko na adrese <https://my.glooko.com>

- Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.
- Ťuknite na položku Prihlásiť sa.

### AKO ZÍSKAŤ POMOC S PRIHLÁSENÍM DO ÚČTU GLOOKO

#### • ZABUDNUTÉ HESLO:

Ak si nepamätáte heslo na prihlásenie, ťuknite na položku **Zabudnuté heslo**, aby ste si vyžiadali e-mail na obnovenie hesla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

#### • ODBLOKOVANIE ÚČTU:

Ak ste heslo zadali nesprávne päťkrát, váš účet sa zablokuje. E-mail s pokynmi na odblokovanie sa automaticky odošle na e-mailovú adresu vášho účtu. Ak ste však nedostali e-mail, kliknite na položku **Nedostal som pokyny na odblokovanie** – budete presmerovaní na stránku odblokovania. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

## 2 Stiahnutie inštalačného súboru softvéru

Po prihlásení na tabuli Dashboard v MyGlooko si budete musieť stiahnuť inštalačný súbor.

- Ťuknite na položku **Nastavenia**.
- Posuňte sa do dolnej časti stránky a kliknite na položku **Získať Glooko Uploader**.
- Budete presmerovaní na obrazovku s tlačidlami na inštaláciu softvéru Glooko Uploader pre Mac alebo PC. Kliknutím na tlačidlo Mac alebo PC si stiahnete inštalačný súbor.



## 3 Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie

V závislosti od webového prehliadača a operačného systému môže byť potrebné vyhľadať stiahnutý inštalačný súbor alebo sa môže zobrazíť kontextové okno so žiadosťou o spustenie súboru.

- Ak používate **PC**, pozrite sa do priečinka naposledy prevzatých súborov
- Ak používate **MAC**, pozrite sa do priečinka pre stiahnuté súbory vo Finderi

Keď sa vám súbor podarí nájsť, dvakrát naň kliknite a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke. Na konci procesu inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

**POZNÁMKA:** Pre používateľov systému FreeStyle Libre vo Švédsku, Nórsku a USA je dôležité, aby ste počas procesu inštalácie vybrali, že používate systém FreeStyle Libre. Tým nainštalujete dodatočný systém FreeStyle Libre DataHub, ktorý je potrebný na tieto prenosy.

# Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Aby ste mohli používať softvér Glooko Uploader, budete potrebovať účet poskytovateľa Glooko a predplatné, ktoré podporuje softvér Glooko Uploader. Budete tiež potrebovať konkrétne prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Glooko (<https://support.glooko.com>).


## 1 Vyžiadanie prepojenia na stiahnutie softvéru Glooko Uploader

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia požiadať o prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader.

- Obráťte sa na technickú podporu Glooko (<https://support.glooko.com>) a požiadajte o prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader.

## 2 Stiahnutie inštalačného súboru softvéru

- Keď dostanete prepojenie na stiahnutie softvéru od spoločnosti Glooko, kliknite na prepojenie vo vašom e-maile. Budete presmerovaní na obrazovku s tlačidlami na inštaláciu softvéru Glooko Uploader pre Mac alebo PC. Kliknutím na tlačidlo Mac alebo PC si stiahnete inštalačný súbor.

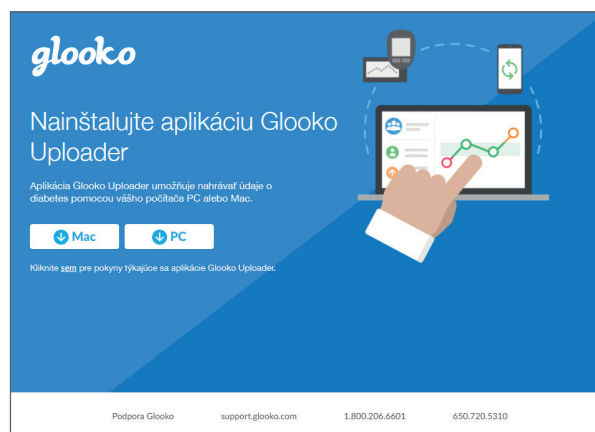

## 3 Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie

V závislosti od webového prehliadača a operačného systému môže byť potrebné vyhľadať stiahnutý inštalačný súbor alebo sa môže zobrazíť kontextové okno so žiadosťou o spustenie súboru.

- Ak používate **PC**, pozrite sa do priečinka naposledy prevzatých súborov
- Ak používate **MAC**, pozrite sa do priečinka pre stiahnuté súbory vo Finderi

Keď sa vám súbor podarí nájsť, dvakrát naň kliknite a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke. Na konci procesu inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

**POZNÁMKA:** Pre používateľov systému FreeStyle Libre vo Švédsku, Nórsku a USA je dôležité, aby ste počas procesu inštalácie vybrali, že používate systém FreeStyle Libre. Tým nainštalujete dodatočný systém FreeStyle Libre DataHub, ktorý je potrebný na tieto prenosy.

# Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Po inštalácii softvéru Glooko Uploader a reštartovaní počítača vyhľadajte ikonu Glooko Uploader buď na ploche (PC), alebo v priečinku Aplikácie (Mac).

## 4 Spustenie softvéru Glooko Uploader

- **Vyhľadajte** ikonu Glooko Uploader na ploche (PC) alebo v priečinku Aplikácie (Mac).
- **Dvojitým** kliknutím na ikonu Glooko Uploader spustíte program.

**POZNÁMKA:** Pred prvým spustením softvéru Glooko Uploader sa uistite, že ste reštartovali počítač.



## 5 Prihlásenie sa do účtu Glooko

Po spustení softvéru Glooko Uploader sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu Glooko.

- Zadajte svoj **e-mail alebo používateľské meno**
- Zadajte **heslo**
- Ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.

### AKO ZÍSKAŤ POMOC S PRIHLÁSENÍM DO ÚČTU GLOOKO

Ak si nepamätáte heslo na prihlásenie, kliknite na položku **Zabudnuté heslo**, aby ste si vyžiadali e-mail na obnovenie hesla. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

A screenshot of the Glooko Uploader login window. The title bar says 'Glooko Uploader'. The main heading is 'PRIHLÁSENIE'. Below it, there is an information icon and text: 'Na nahratie údajov sa prihláste do účtu Glooko.' Then, 'Nemáte účet?' followed by 'Pacienti: [Zaregistrujte sa.](#)' and 'Kliniky: [Kontaktujte Glooko podporu.](#)'. There are two input fields: 'E-mail alebo meno používateľa' and 'Heslo'. Below the fields is a checkbox 'Zapamätať si' and a blue 'Prihlásenie' button. At the bottom, there are links for 'Zabudli ste heslo?' and 'Prihlásiť sa pomocou SSO'.

### JEDNO PRIHLÁSENIE (SSO) PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI


Funkcia jedného prihlásenia (SSO) umožňuje zdravotníckym pracovníkom prihlásiť sa pomocou existujúcej zabezpečenej overovacej služby zdravotníckeho zariadenia (poskytovateľ identity; IdP).

1. Kliknite na možnosť „Prihlásiť sa pomocou SSO” v spodnej časti okna prihlásenia.
2. Dostanete sa na webovú lokalitu Glooko Web, kde budete musieť zadať e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom Glooko.
3. Glooko bude komunikovať s nakonfigurovaným systémom vášho zdravotníckeho zariadenia s cieľom identifikovať vaše IdP a budete presmerovaní na prihlasovaciu stránku IdP.
4. Prihláste sa pomocou svojich bežných klinických poverení pre daného poskytovateľa identity.
5. Po overení v systéme vášho zdravotníckeho zariadenia budete presmerovaní späť na obrazovku Glooko Uploader, aby ste mohli pokračovať v nahrávaní zo zariadenia.


# Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti


## 6 Funkcie v softvéri Glooko Uploader

### ODHLÁSENIE SA Z ÚČTU


- Zo svojho účtu Glooko sa môžete odhlásiť ťuknutím na tlačidlo Profil  v pravom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Ťuknite na položku **Odhlásiť sa**


### ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O PROFILE

- Informácie o profile môžete zobrazit' ťuknutím na tlačidlo Profil  v pravom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Toto kontextové okno zahŕňa nasledujúce položky:
  - o Vaše **meno**
  - o Vaše **primárne autorizované pracovisko** (poskytovateľ **zdravotnej starostlivosti**) a **súvisiaci kód ProConnect**
  - o Vaša **e-mailová adresa**
- Ťuknite na položku **Odhlásiť sa**.

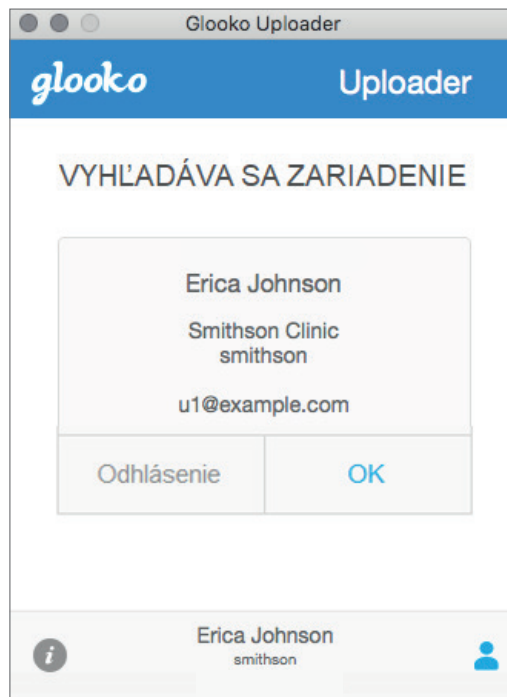

### POZRITE SI ĎALŠIE INFORMÁCIE O SOFTVÉRI GLOOKO UPLOADER

- Ďalšie informácie môžete zobrazit' ťuknutím na tlačidlo Informácie  v ľavom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Toto kontextové okno obsahuje informácie o technickej podpore produktu, popis produktu a vyhlásenie o zamýšľanom použití.

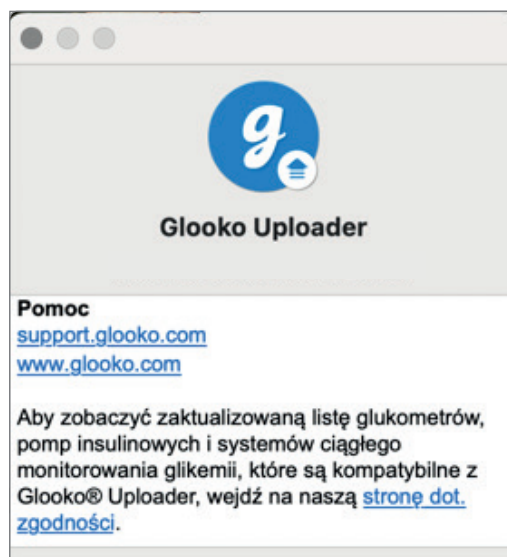

# Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti


## 7 Nahranie údajov o ochorení diabetes

Po prihlásení do softvéru Glooko Uploader môžete nahráť údaje zo svojho zariadenia pre diabetikov.

### PRIPOJENIE KÁBLA ZARIADENIA PRE DIABETIKOV K POČÍTAČU

Po prihlásení začne softvér Glooko Uploader hľadať zariadenie.

- K počítaču pripojte príslušný USB kábel alebo infračervený kábel zariadenia pre diabetikov.
- Po rozpoznaní kábla počkajte niekoľko sekúnd, kým sa pred pripojením zariadenia rozpoznejú ovládače kábla.

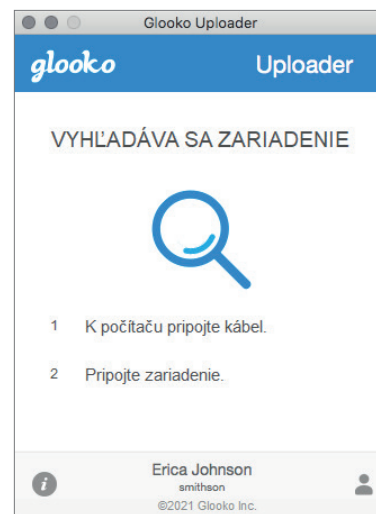


### PRIPOJENIE ZARIADENIA PRE DIABETIKOV KU KÁBLU

- Po pripojení kábla k počítaču ku káblu pripojte zariadenie pre diabetikov.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že používate kábel, ktorý bol dodaný so zariadením pre diabetikov. Ak potrebujete získať nový kábel, obráťte sa na výrobcu zariadenia pre diabetikov.

- Po pripojení zariadenia pre diabetikov k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný so zariadením, zariadenie začne nahrávať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.
- Ak sa zobrazí chyba, chybu odstráňte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa naďalej vyskytujú problémy, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Glooko a požiadajte o pomoc.

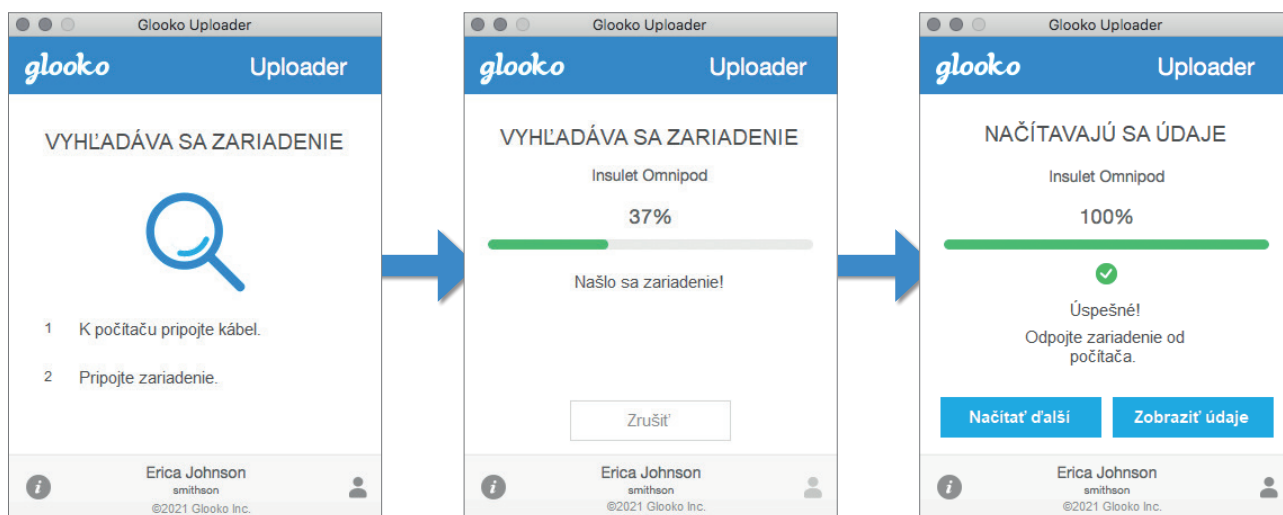

# Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

## 8 Zobrazenie údajov o ochorení diabetes


Po nahraní údajov zo zariadenia pre diabetikov pomocou softvéru Glooko Uploader môžete [údaje zobrazit na stránke https://my.glooko.com](https://my.glooko.com) po prihlásení sa do účtu Glooko.

- **Pacienti:**  
Ďalšie informácie o webovej tabuli Dashboard v MyGlooko nájdete v dokumente [Glooko na osobné použitie – stručná príručka](https://support.glooko.com) na adrese <https://support.glooko.com>
- **Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:**  
Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Population Tracker, pozrite si dokument: [Glooko pre kliniky – stručná príručka](https://support.glooko.com) na adrese <https://support.glooko.com>



# Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy

Nižšie sú uvedené pokyny, ako nahráť údaje o ochorení diabetes do systému Glooko pomocou aplikácie Glooko® Uploader. Ak nie sú pre zariadenie dostupné výslovné pokyny na nahrávanie, stačí ho pripojiť k PC/Mac pomocou konkrétneho USB kábla a nahrávanie prebehne automaticky.

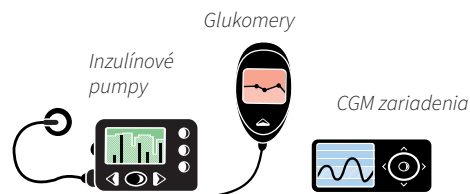

**i** Nezabudnite, že niektoré diabetické pomôcky nemusia byť dostupné na vašom trhu.

## Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

### Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB  
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo  
FreeStyle Precision Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Abbott Xceed  
USB



FreeStyle Libre Reader | FreeStyle Libre 3 Reader  
FreeStyle Libre 2 Reader

Micro USB



### Acon Laboratories

On Call® Express | On Call® Extra Voice  
On Call® Express II | On Call® Sure  
On Call® Express Voice | On Call® Sure Sync  
On Call® Extra

On Call USB  
(2,5 mm)



### Activmed

GlucocCheck GOLD (TD-4289)

Micro USB



### Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Ally BGK

Micro USB



Ally BGM

i-Sens USB  
(2,5 mm)



### Animas

OneTouch Ping (meter)

Mini USB




Spoločnosť Abbott obmedzila kompatibilitu na Švédsko, Nórsko a USA.


**POZNÁMKA:** Počas procesu inštalácie softvéru Glooko Uploader nezabudnite vybrať, že používate systém FreeStyle Libre. Tým nainštalujete dodatočný systém FreeStyle Libre DataHub, ktorý je potrebný na tieto prenosy.

1. Zariadenie pripojte k počítaču.
2. Stlačte tlačidlo napájania na meracom zariadení.


# Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

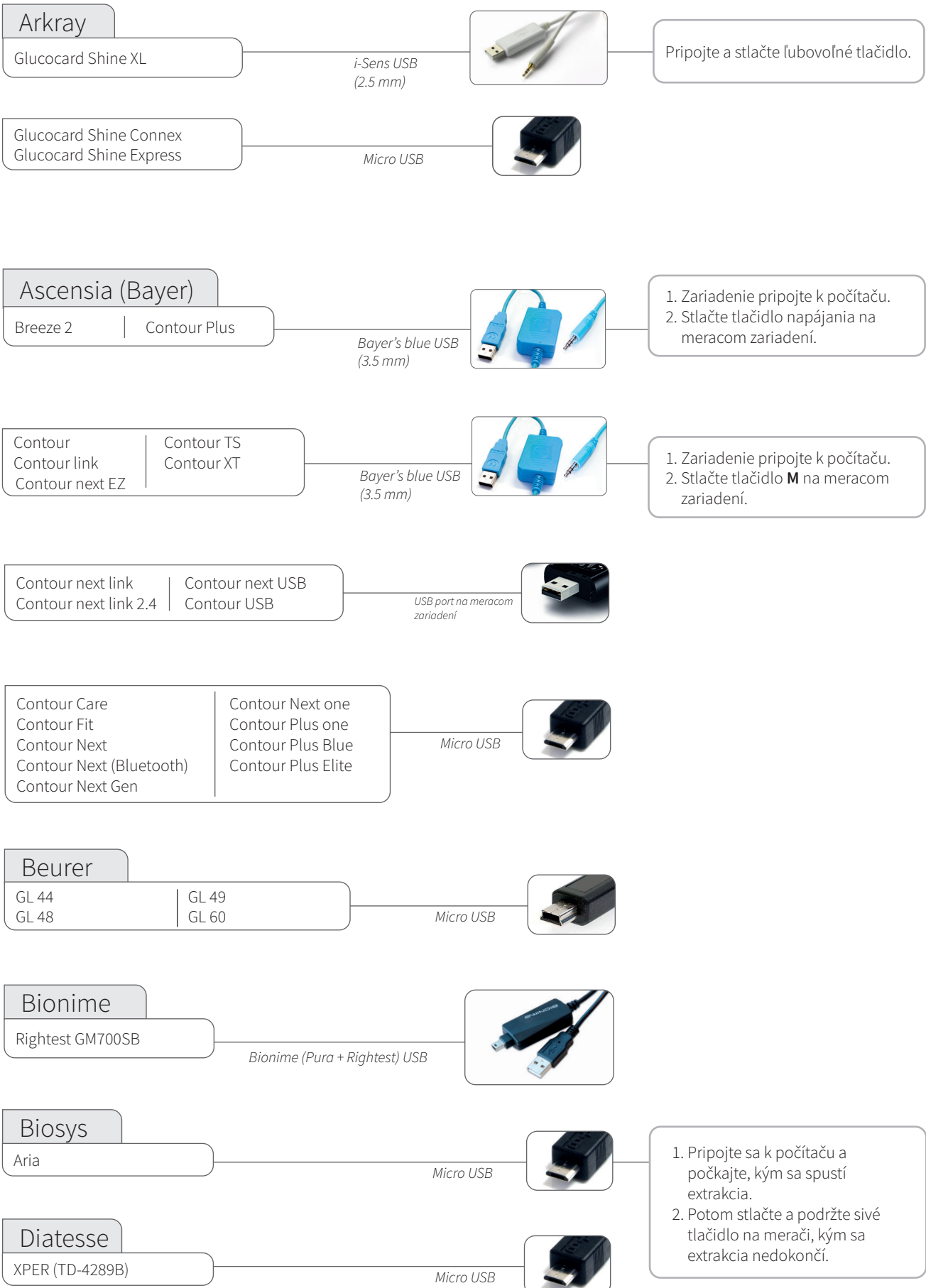


# Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

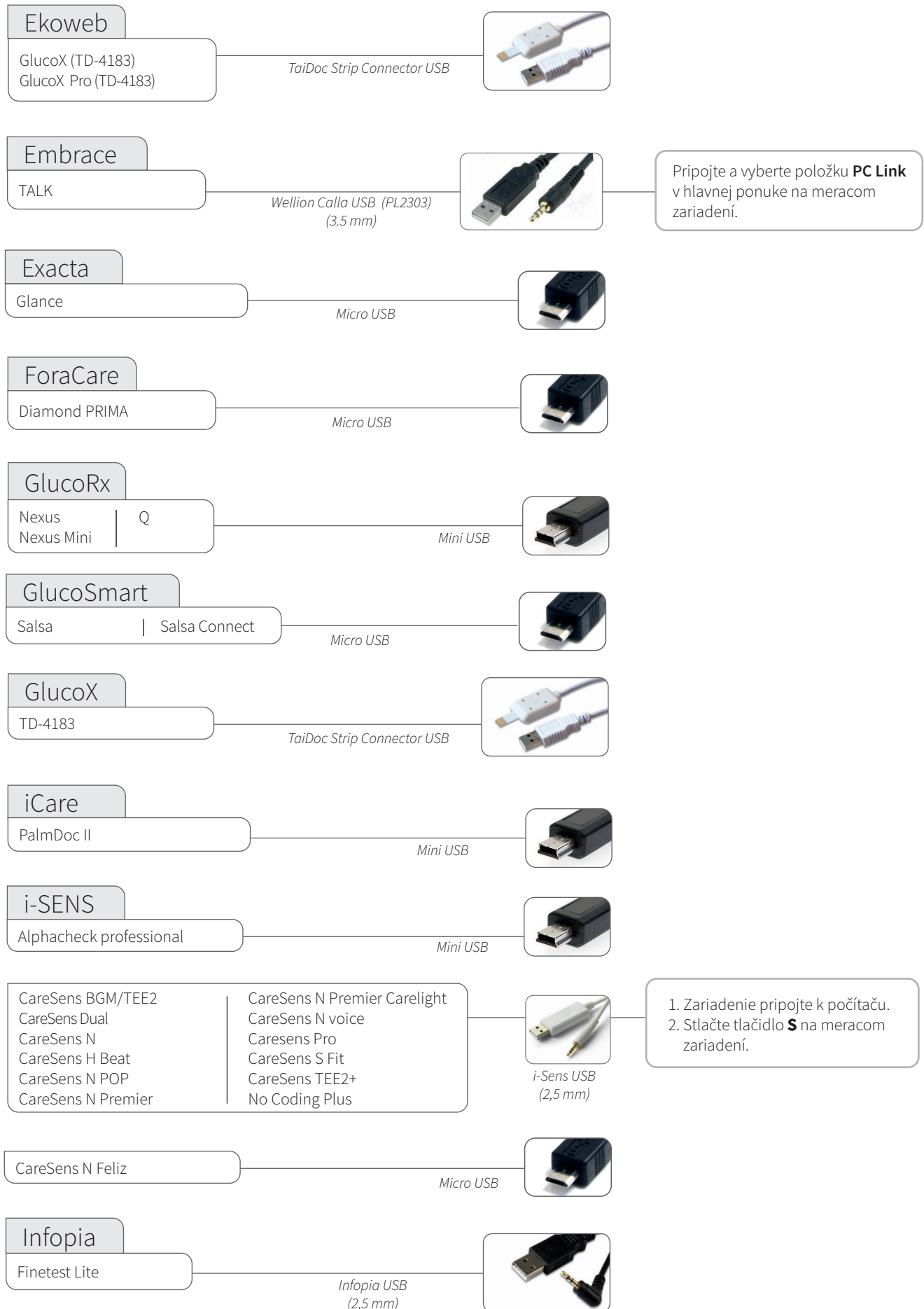

# Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

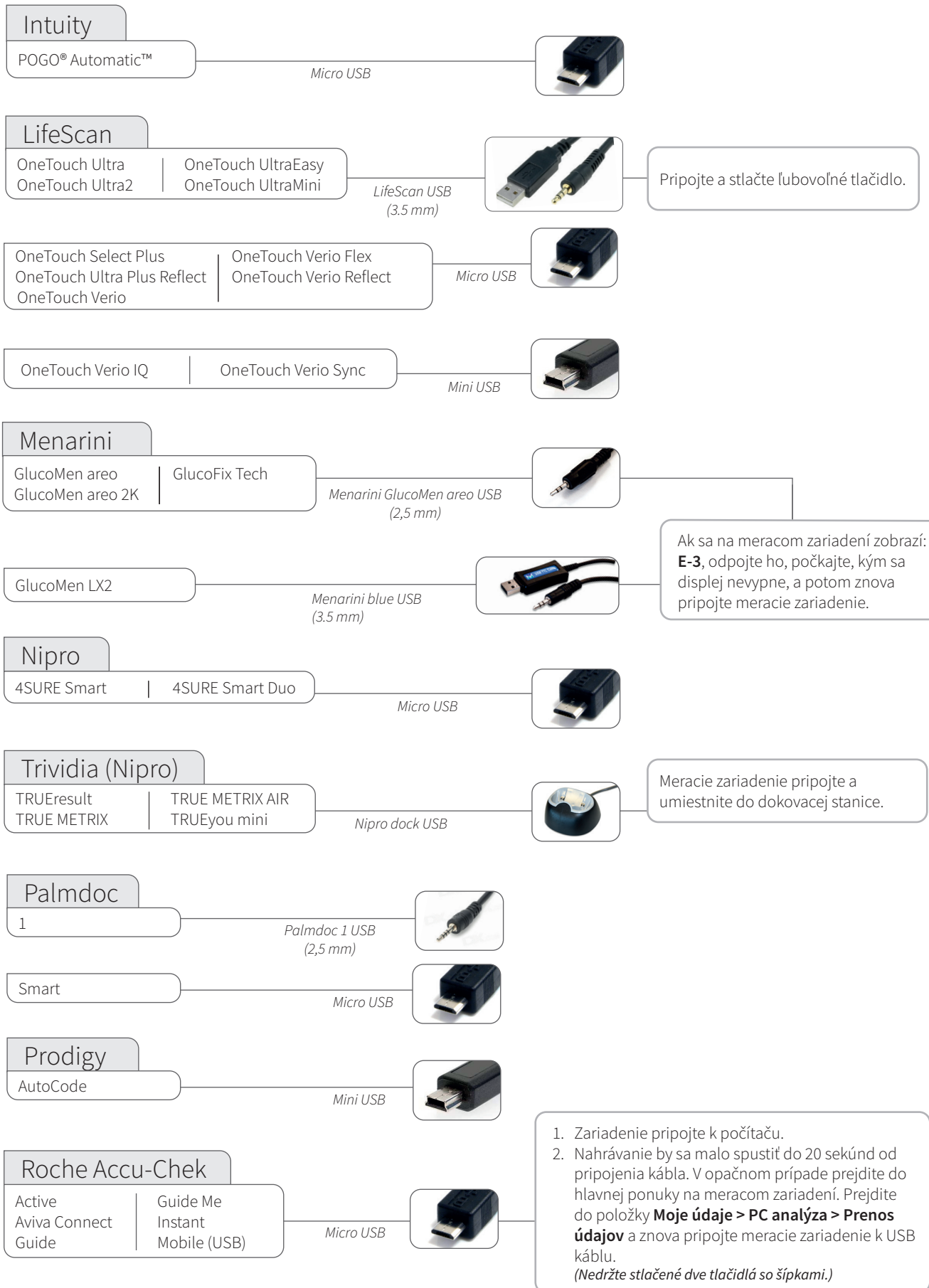

# Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

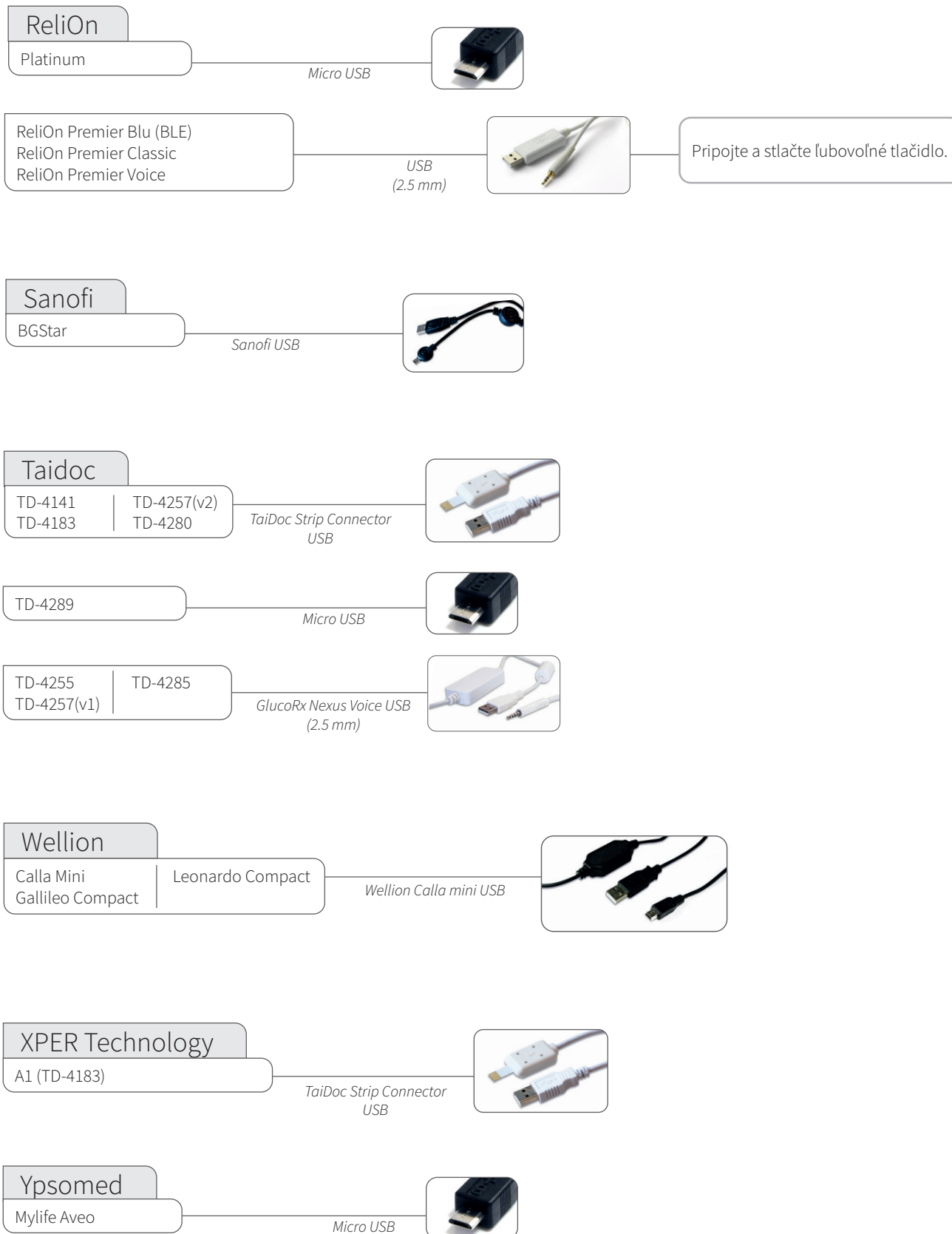

## Glukomery – s infračerveným pripojením



### Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano  
Accu-Chek Aviva Plus Black  
Accu-Chek Aviva Plus Silver  
Accu-Chek Nano  
Accu-Chek Performa  
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTISYS Li, Li2 alebo Accu-Chek 360°

1. Infračervený kábel pripojte k počítaču.
2. Keď je meracie zariadenie vypnuté, aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním dvoch tlačidiel so šípkami, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Accu-Chek Compact Plus



ACTISYS Li, Li2 alebo Accu-Chek 360°

1. Infračervený kábel pripojte k počítaču.
2. Aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním tlačidiel **S** a **M** pod displejom, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Accu-Chek Aviva Combo  
Accu-Chek Aviva Expert



ACTISYS Li, Li2 alebo Accu-Chek 360°

1. Infračervený kábel pripojte k počítaču.
2. V hlavnej ponuke prejdite do položky **Moje údaje** a vyberte položku **Prenos údajov**.

## CGM – pripojené pomocou USB kábla

### Dexcom

G4 Platinum  
G4 Platinum with Share  
G5  
Touchscreen Receiver (G5/G6)  
G6 Receiver  
G7 Receiver  
One Receiver  
One+ Receiver

Micro USB




Ak sa nahrávanie nespustí, odpojte prijímač a výberom položky Vypnúť v ponuke vypnite prijímač. Prijímač znova zapnite a pripojte ho k počítaču.

## Meracie zariadenia a inzulínové pumpy – s pripojením NFC

Terumo


Medisafe Fit Smile



1. Pripojte NFC podložku dodanú spoločnosťou Terumo k vášmu počítaču.
2. Umiestnite meracie zariadenie na vrch NFC podložky.

*Nezabudnite, že symbol prenosu na zadnej strane meracieho zariadenia musí byť zároveň so symbolom NFC na NFC podložke.*

Medisafe WITH



1. Pripojte NFC podložku dodanú spoločnosťou Terumo k svomu počítaču.
2. Overte, či sa hlavná ponuka zobrazuje na diaľkovom ovládaní pumpy.
3. Umiestnite diaľkové ovládanie na vrchu NFC podložky.

*Nezabudnite, že symbol prenosu na zadnej strane diaľkového ovládania musí byť zároveň so symbolom NFC na NFC podložke.*

## Inzulínové pumpy – s infračerveným pripojením

Animas (IR)





OneTouch Ping Vibe



ACTISYS Li alebo Li2  
Poznámka! Ak používate Windows 8 alebo 10, bude potrebné použiť kábel ACTISYS Li2.

1. Pozastavte pumpu. (HLAVNÁ PONUKA, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Pozastaviť** sa zvýrazní).
2. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pumpu umiestnite zadnou stranou k IR káblu na bezdrôtové stahovanie Actisys.
4. Po dokončení prenosu: Obnovte činnosť pumpy (HLAVNÁ PONUKA, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Obnoviť** sa zvýrazní). Stlačte tlačidlo **OK**.
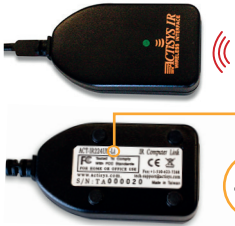
### Kompatibilné infračervené káble

<p><b>Kábel ACTiSYS – Li</b></p>  <p><b>Kompatibilné operačné systémy:</b> macOS X: 10.14 – 11.0 Windows: –</p>	<p><b>Kábel ACTiSYS – Li2</b></p>  <p><b>Kompatibilné operačné systémy:</b> macOS X: 10.14 – 11.0 Windows: 8, 10</p>	<p><b>Kábel Accu-Chek – 360° (Realtyme)</b></p>  <p><b>Kompatibilné operačné systémy:</b> macOS X: 10.14 – 11.0 Windows: 8, 10</p>	<p><b>Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2</b></p>  <p><b>Kompatibilné operačné systémy:</b> macOS X: 10.14 – 11.0 Windows: 8, 10</p>
--	---	--	---




#### Chýba vám kábel?

Obráťte sa na výrobcu vášho konkrétneho zariadenia pre diabetikov.

# Inzulínové pumpy – pripojené pomocou USB kábla

Equil/Wellion  
MICRO-pump

Micro USB



Insulet  
Omnipod® System

Mini USB



Omnipod® Dash™ System

Micro USB



1. Pripojte a stlačte tlačidlo napájania na PDM.
2. Odomknite PDM a ťuknite na položku „Exportovať“ na obrazovke.

Medtronic

630G	670G
640G	


USB port na meracom zariadení

1. Zapojte merač 2.4 Contour Next Link 2.4 do jedného z USB portov vášho počítača.
2. Podľa pokynov na obrazovke vášho Glooko Uploader nahrajte údaje z čerpadla Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo  
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Otvorte Hlavnú ponuku ručnej jednotky pre čerpadlo.
2. V Hlavnej ponuke vyberte možnosť USB.
3. Pomocou micro USB kábla pripojte ručnú jednotku k počítaču.

Tandem


t:flex t:slim	t:slim G4 t:slim X2
------------------	------------------------

Micro USB



Vicentra  
Kaleido

Micro USB



- Prejdite do žltej ponuky a vyberte nahrávanie údajov.

# Inzulínové pumpy – pripojené pomocou infračervených káblov

## Kompatibilné infračervené káble


Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix



Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche  
Accu-Chek Aviva Insight  
Accu-Chek Performa Insight

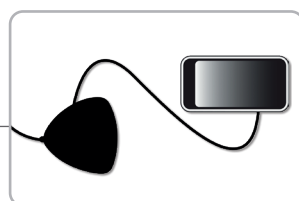

**Smart Pix 2**  
*Poznámka! Mobilný telefón pumpy pripojte pomocou micro USB kábla k zariadeniu Smart Pix 2.*

1. Kábel Smart Pix 2 pripojte k počítaču a počkajte, kým modrý indikátor na Smart Pix 2 nezačne pomaly blikať.
2. Mobilný telefón pripojte k Smart Pix 2 pomocou micro USB kábla.
3. V ponuke mobilného telefónu vyberte položku **Pripojiť k počítaču** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Uistite sa, že pumpa je v dosahu mobilného telefónu.
5. Modrý indikátor na Smart Pix 2 svieti, kým sa údaje prenášajú zo zariadenia do Smart Pix 2.
6. Modrý indikátor zhasne a Smart Pix 2 aj samotné zariadenie vydajú zvukový signál, ktorý informuje o tom, že údaje sa prenášajú zo Smart Pix 2 do softvéru Glooko Uploader. Smart Pix 2 ešte neodpájajte!
7. Počkajte, kým softvér Glooko Uploader nepotvrdí, že nahrávanie bolo úspešné.


Roche  
Accu-Chek Spirit Combo



**Smart Pix alebo Smart Pix 2**  
*Poznámka! Pri používaní zariadenia Smart Pix sa vyžaduje verzia softvéru Smart Pix 3.02 alebo vyššia.*

1. Pripojte zariadenie Smart Pix k počítaču a počkajte, až kým nezačne pomaly blikať modrý indikátor na zariadení Smart Pix.
2. Prepnite pumpu do režimu **prenosu údajov** (zastavte pumpu a vstúpte do ponuky **prenosu údajov**).
3. Umiestnite pumpu IČ okom smerom k zariadeniu Smart Pix. Modrý indikátor signalizuje, že sa údaje prenášajú do zariadenia Smart Pix.
4. Počkajte, až kým modrý indikátor nezačne opäť pomaly blikať alebo prestane blikať úplne.
5. Údaje sa teraz prenášajú zo zariadenia Smart Pix do nástroja Glooko Uploader. Zariadenie Smart Pix ešte neodpájajte!
6. Počkajte, až kým nástroj Glooko Uploader nebude signalizovať, že nahrávanie bolo úspešné.



 Glooko Inc  
579 University Avenue  
Palo Alto, CA 94301  
USA

Podpora  
help@glooko.com  
<https://support.glooko.com>