



Glooko® Uploader

تعليمات الاستخدام – لمستخدمي Glooko

المحتويات

5-4 العثور على جهازك

6 معلومات عامة

- 6 وصف المنتج
- 6 الاستخدام المقصود
- 6 الأجهزة المدعومة
- 6 التحذيرات
- 6 موانع الاستعمال

7 تعليمات الاستخدام

- 8 المرضى
- 8 تسجيل الدخول إلى لوحة معلومات MyGlooko على الموقع <https://my.glooko.com>
- 8 تنزيل ملف تثبيت البرنامج
- 8 العثور على ملف التثبيت وتشغيل الملف

9 مقدمو الرعاية الصحية

- 9 طلب رابط لتنزيل برنامج Glooko Uploader
- 9 تنزيل ملف تثبيت البرنامج
- 9 العثور على ملف التثبيت وتشغيل الملف

10 المرضى ومقدمو الرعاية الصحية

- 10 فتح برنامج Glooko Uploader
- 10 تسجيل الدخول إلى حساب Glooko
- 11 ميزات Glooko Uploader
- 12 تحميل بيانات مرض السكري
- 13 عرض بيانات مرض السكري

14 الأجهزة المتوافقة وطرق الإرسال



جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز مضخة الإنسولين

جهاز قياس الجلوكوز

العثور على جهازك

Ekoweb

- 16 (GlucoX (TD-4183
16(GlucoX Pro (TD-4183

Embrace

- 16 TALK

Equil/Wellion

- 21 MICRO-pump

Exacta

- 16 Glance

ForaCare

- 16 Diamond PRIMA

GlucorX

- 16 Nexus
16 Nexus Mini
16 Q

Glucosmart

- 16 Salsa
16 Salsa Connect

GlucosX

- 16 TD-4183

iCare

- 16 PalmDoc II

i-SENS

- 16 alphacheck professional
16 CareSens BGM/TEE2
16 CareSens Dual
16 CareSens H Beat
16 CareSens N
16 CareSens N Feliz
16 CareSens N POP
16 CareSens N Premier
16 CareSens N Premier Carelight
16 CareSens S Fit
16 CareSens N Voice
16 CareSens Pro
16 No Coding Plus
16 TEE2+

(Ascensia (Bayer

- 15 Breeze 2
15 Contour
15 Contour Care
15 Contour Fit
15 Contour Link
15 Contour Next
15 (Bluetooth) Contour Next
15 Contour Next Gen
15 Contour Next One
15 Contour Plus
15 Contour Plus Blue
15 Contour Plus Elite
15 Contour Plus One
15 Contour next EZ
15 Contour next Link
15 Contour next Link 2.4
15 Contour next USB
15 Contour TS
15 Contour XT
15 Contour USB

Beurer

- 16 GL 44
16 GL 48
16 GL 49
16 GL 60

Bionime

- 16 Rightest GM700SB

Biosys

- 16 Aria

Dexcom

- 19 G4 Platinum
19 G4 Platinum with Share
19 G5
19 Touchscreen Receiver G5/G6
19 G6 Receiver
19 G7 Receiver
19 One Receiver
19 One+ Receiver

Diatesse

- 15 XPER (TD-4289B)

Abbott

- 14 FreeStyle Freedom Lite
14 FreeStyle InsuLinx
14 FreeStyle Lite
14 FreeStyle Optium Neo
14 FreeStyle Precision Neo
14 Precision Xtra
14 Precision Xceed

- 14 FreeStyle Libre Reader
14 FreeStyle Libre 2 Reader
14 FreeStyle Libre 3 Reader

Acon Laboratories

- 14 On Call® Express
14 On Call® Express II
14 On Call® Express Voice
14 On Call® Extra
14 On Call® Extra Voice
14 On Call® Sure
14 On Call® Sure Sync

Activmed

- 14... GlucoCheck Gold (TD-4289B)

AgaMatrix

- 14 WaveSense Jazz™
14 Ally BGK
14 Ally BGM

Animas

- 15 (جهاز قياس) OneTouch Ping

Animas

- 20 (مضخة) OneTouch Ping
20 Vibe

Arkray

- 15 GlucoCard Shine Connex
15 GlucoCard Shine Express
15 GlucoCard Shine XL
15 ReliOn Premier Blu
15 ReliOn Premier Classic
15 ReliOn Premier Voice

Tandem

21.....	t:flex	
21.....	t:slim	
21.....	t:slim G4	
21.....	t:slim X2	

Terumo

20.....	Medisafe Fit Smile	
20.....	Medisafe WITH	

ViCentra

21.....	Kaleido	
---------	---------	---

Trividia (Nipro)

17.....	TRUE METRIX	
17.....	TRUE METRIX AIR	
17.....	TRUEresult	
17.....	TRUEyou mini	

Wellion

18.....	Calla Mini	
18.....	Galileo Compact	
18.....	Leonardo Compact	

XPER Technology

18.....	A1 (TD-4183)	
---------	--------------	---

Ypsomed

18.....	Mylife Aveo	
---------	-------------	---

Palmdoc

18.....	1	
18.....	Smart	

Prodigy

18.....	AutoCode	
---------	----------	---

ReliOn

18.....	Platinum	
18.....	Premier Blu	
18.....	Premier Classic	
18.....	Premier Voice	

Roche

18.....	Accu-Chek Active	
18.....	Accu-Chek Aviva Connect	
19.....	Accu-Chek Aviva Combo	
19.....	Accu-Chek Aviva Expert	
19.....	Accu-Chek Aviva Nano	
19.....	Accu-Chek Aviva Plus Black	
19.....	Accu-Chek Aviva Plus Silver	
19.....	Accu-Chek Compact Plus	
18.....	Accu-Chek Guide	
18.....	Accu-Chek Guide Me	
18.....	Accu-Chek Instant	
18.....	Accu-Chek Mobile (USB)	
19.....	Accu-Chek Nano	
19.....	Accu-Chek Performa	
19.....	Accu-Chek Performa Nano	

Roche

22.....	Accu-Chek Aviva Insight	
22.....	Accu-Chek Performa Insight	
21.....	Accu-Chek Aviva Solo	
21.....	Accu-Chek Guide Solo	
22.....	Accu-Chek Spirit Combo	

Sanofi

18.....	BGStar	
---------	--------	---

Taidoc

18.....	TD-4141	
18.....	TD-4183	
18.....	TD-4206	
18.....	TD-4255	
18.....	TD-4257(v1)	
18.....	TD-4257(v2)	
18.....	TD-4280	
18.....	TD-4285	
18.....	TD-4289	

Infopia

16.....	Finetest Lite	
---------	---------------	---

Insulet

21.....	Omnipod®	
21.....	Omnipod® Dash™ نظام	

Intuity

17.....	POGO® Automatic™	
---------	------------------	---

LifeScan

17.....	OneTouch Select Plus	
17.....	OneTouch Ultra	
17.....	OneTouch Ultra	
17.....	Plus Reflect	
17.....	OneTouch Ultra2	
17.....	OneTouch UltraEasy	
17.....	OneTouch UltraMini	
17.....	OneTouch Verio	
17.....	OneTouch Verio Flex	
17.....	OneTouch Verio IQ	
17.....	OneTouch Verio Reflect	
17.....	OneTouch Verio Sync	

Medtronic

21.....	630G	
21.....	640G	
21.....	670G	

Menarini

17.....	GlucoFix Tech	
17.....	GlucoMen areo	
17.....	GlucoMen areo 2K	
17.....	GlucoMen LX2	

Nipro

17.....	4SURE Smart	
17.....	4SURE Smart Duo	

معلومات عامة

وصف المنتج

تم تصميم Glooko Uploader® ليستخدمه الأفراد أو اختصاصيو الرعاية الصحية في المنزل أو في منشآت الرعاية الصحية لنقل البيانات المحددة مسبقاً من أجهزة المراقبة المنزلية إلى قاعدة بيانات الخادم. ويمكن استخدام الجهاز كمنتج مستقل أو إلى جانب Glooko System.

الاستخدام المقصود

نظام Glooko هو منصة لإدارة مرض السكري يمكن استخدامها في العيادة أو عن بُعد من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية والمرضى. وهو يتيح عرض بيانات المرضى من الأجهزة الطبية المتوافقة وأجهزة المراقبة الصحية الأخرى. كما أنه يسمح لاختصاصيي الرعاية الصحية بدعم علاج مرض السكري عن طريق تحليل علاج مرض السكري وبرنامج رعاية المريض.

الأجهزة المدعومة

- لبدء التشغيل، سيحتاج الأفراد إلى:
1. جهاز قياس جلوكوز الدم متوافق أو مضخة إنسولين أو جهاز مراقبة مستمرة للجلوكوز (CGM)؛
 2. كمبيوتر PC أو كمبيوتر Mac مزود بأحد أنظمة التشغيل (OS) التالية:
 - Windows 10 (32 بت و 64 بت)
 - Windows 11 (64 بت)
 - macOS 15.0: Sequoia
 - macOS 26.0: Tahoe
 - macOS 27.0: Golden Gate
 3. برنامج Glooko Uploader؛
 4. حساب Glooko؛
 5. كابل المزامنة أو تنزيل الجهاز المرفق مع جهاز مرض السكري المدعوم.

تحذير!

لا يقوم Glooko بقياس البيانات التي ينقلها أو تفسيرها أو اتخاذ القرارات بشأنها، وهو غير مصمم لتقديم قرارات معالجة تلقائية ولا ليتم استخدامه كبديل لرأي احترافي. من هنا، يجب إجراء أي تشخيص طبي أو علاج طبي تحت إشراف مقدم رعاية صحية ملائم ومراقبته.

إذا كانت لديك مخاوف بشأن التشخيص والعلاج الحاليين لمرض السكري، فيُرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. في حال وجود خلل في Glooko System، يُرجى التوقف عن استخدام المنتج والاتصال بدعم Glooko.

موانع الاستخدام

غير موجودة.

تعليمات الاستخدام – Glooko Uploader

ستحتاج إلى إنشاء حساب Glooko لاستخدام Glooko Uploader. ستتم مزامنة البيانات التي تم تحميلها باستخدام Glooko Uploader مع حساب Glooko الخاص بك، الذي يمكن الوصول إليه بواسطة معلومات تسجيل الدخول على Glooko. يُعد الإنترنت (شبكة WiFi أو شبكة بيانات خلوية) ضروريًا لمزامنة بياناتك مع خادم Glooko.

المرضى:

- تعرف على كيفية تثبيت البيانات وتحميلها باستخدام Glooko Uploader في الصفحة التالية.



مقدمو الرعاية الصحية:

- تعلم كيفية تثبيت البيانات وتحميلها باستخدام Glooko Uploader في الصفحة 9.



المرضى

للوصول إلى لوحة معلومات MyGlooko وتنزيل برنامج Glooko Uploader، ستحتاج إلى حساب خاص بك على Glooko. يمكنك إنشاء حساب Glooko باستخدام تطبيق Glooko Mobile App التي تعمل بنظام التشغيل iOS أو Android. ويمكنك أيضًا الاتصال بدعم Glooko (<https://support.glooko.com>) للحصول على مساعدة في إنشاء الحساب. بعد إنشاء حسابك على Glooko، يُرجى اتباع التعليمات أدناه.

1 سجل الدخول إلى لوحة المعلومات MyGlooko على الموقع

<https://my.glooko.com>

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- انقر فوق تسجيل الدخول.

الحصول على المساعدة في تسجيل الدخول إلى حساب GLOOKO

- نسيت كلمة المرور:
إذا تعذر عليك تذكر كلمة المرور لتسجيل الدخول، فانقر فوق **نسيت كلمة المرور** لتلقي رسالة بريد إلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكنك أيضًا الاتصال بفريق الدعم من Glooko للحصول على المساعدة.
- إلغاء قفل حسابك:
إذا قمت بإدخال كلمة المرور الخاصة بك بشكل غير صحيح خمس مرات، فسيتم إقفال حسابك. وسيتم تلقائيًا إرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن تعليمات لإلغاء القفل إلى عنوان البريد الإلكتروني. ولكن، إذا لم تتلق رسالة بريد إلكتروني، فانقر فوق **ألم تتلق تعليمات لإلغاء القفل** - وستتم إعادة توجيهك إلى صفحة إلغاء القفل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكنك أيضًا الاتصال بفريق الدعم من Glooko للحصول على المساعدة.

2 تنزيل ملف تثبيت البرنامج

بعد تسجيل الدخول إلى لوحة معلومات MyGlooko، ستحتاج إلى تنزيل ملف التثبيت.



- اضغط على الإعدادات.

• مرّر إلى أسفل الصفحة وانقر فوق **الحصول على Glooko Uploader**.

- سيتم نقلك إلى شاشة تتضمن الأزرار لتثبيت Glooko Uploader على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي. انقر فوق الزر Mac أو الكمبيوتر الشخصي لتنزيل ملف التثبيت.

3 العثور على ملف التثبيت وتشغيل الملف

حسب مستعرض الويب ونظام التشغيل لديك، قد تضطر إلى البحث عن ملف التثبيت الذي تم تنزيله، أو قد ترى نافذة منبثقة تطالبك بتشغيل الملف.

- إذا كنت تستخدم **كمبيوتر شخصي**، فابحث في مجلد التنزيلات الأخيرة.
- إذا كنت تستخدم جهاز **Mac**، فابحث في مجلد التنزيلات في الباحث.

عندما تحدد موقع الملف، انقر فوقه **نقرًا مزدوجًا** واتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة. ستحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر في نهاية عملية التثبيت.

ملاحظة: ملاحظة: بالنسبة إلى مُستخدمي FreeStyle Libre في السويد والنرويج والولايات المتحدة، من المهم تحديد أنك تستخدم FreeStyle Libre في أثناء عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تثبيت FreeStyle Libre DataHub الإضافي المطلوب لعمليات التحميل هذه.

مقدمو الرعاية الصحية

لاستخدام برنامج Glooko Uploader، ستحتاج إلى حساب Glooko لمقدمي الرعاية واشتراك يدعم Glooko Uploader. وستحتاج أيضاً إلى رابط محدد لتنزيل Glooko Uploader. يرجى الاتصال بفريق الدعم من Glooko (<https://support.glooko.com>) للحصول على المساعدة.

1 طلب رابط لتنزيل برنامج Glooko Uploader

يجب أن يطلب مقدمو الرعاية الصحية رابطاً لتنزيل برنامج Glooko Uploader.

- يُرجى الاتصال بفريق الدعم من Glooko (<https://support.glooko.com>) لطلب رابط لتنزيل برنامج Glooko Uploader.

2 تنزيل ملف تثبيت البرنامج



- عندما تتلقى الرابط لتنزيل البرنامج من Glooko، انقر فوقه في بريدك الإلكتروني. سيتم نقلك إلى شاشة تتضمن الأزرار لتثبيت Glooko Uploader على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي. انقر فوق الزر Mac أو الكمبيوتر الشخصي لتنزيل ملف التثبيت.

3 العثور على ملف التثبيت وتشغيل الملف

حسب مستعرض الويب ونظام التشغيل لديك، قد تضطر إلى البحث عن ملف التثبيت الذي تم تنزيله، أو قد ترى نافذة منبثقة تطالبك بتشغيل الملف.

- إذا كنت تستخدم كمبيوتر شخصياً، فابحث في مجلد التنزيلات الأخيرة
- إذا كنت تستخدم جهاز Mac، فابحث في مجلد التنزيلات في الباحث

عندما تحدد موقع الملف، انقر فوقه نقرًا مزدوجًا واتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة. ستحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر في نهاية عملية التثبيت.

ملاحظة: ملاحظة: بالنسبة إلى مُستخدمي FreeStyle Libre في السويد والنرويج والولايات المتحدة، من المهم تحديد أنك تستخدم FreeStyle Libre في أثناء عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تثبيت FreeStyle Libre DataHub الإضافي المطلوب لعمليات التحميل هذه.

المرضى ومقدمو الرعاية الصحية

بعد تثبيت Glooko Uploader وإعادة تشغيل الكمبيوتر، حدد موقع رمز Glooko Uploader على سطح المكتب (الكمبيوتر الشخصي) أو في مجلد التطبيقات (Mac).



4 فتح برنامج Glooko Uploader

- حدد موقع رمز Glooko Uploader على سطح المكتب (الكمبيوتر الشخصي) أو في مجلد التطبيقات (Mac).
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Glooko Uploader لبدء تشغيل البرنامج.

ملاحظة: تأكد من إعادة تشغيل الكمبيوتر قبل بدء تشغيل Glooko Uploader للمرة الأولى.

5 تسجيل الدخول إلى حساب Glooko

عندما يتم فتح برنامج Glooko Uploader، ستحتاج إلى تسجيل دخولك إلى حساب Glooko.

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم الخاص بك
- أدخل كلمة المرور
- اضغط على تسجيل الدخول.


الحصول على المساعدة في تسجيل الدخول إلى حساب GLOOKO
إذا تعذر عليك تذكر كلمة المرور لتسجيل الدخول، فانقر فوق أنسيت كلمة مرورك؟ لتلقي رسالة بريد إلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور. يمكنك أيضًا الاتصال بفريق الدعم من Glooko للحصول على المساعدة.

تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لمقدمي الرعاية الصحية (HCPs)
تسمح ميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لاختصاصيي الرعاية الصحية بتسجيل الدخول باستخدام خدمة المصادقة الآمنة الحالية الخاصة بعياداتهم (موفر الهوية (IdP)).

1. انقر فوق خيار "تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الأحادي" في أسفل نافذة تسجيل الدخول.
2. سيتم توجيهك إلى Glooko Web حيث يتعين عليك إدخال عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Glooko الخاص بك.
3. سيتواصل Glooko مع نظام عيادتك الذي تم تكوينه لتحديد موفر الهوية الخاص بك وستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل دخول موفر الهوية الخاص بك.
4. سجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد العيادة المعتادة الخاصة بموفر الهوية هذا.
5. بمجرد المصادقة باستخدام نظام عيادتك، سيتم توجيهك مرة أخرى إلى شاشة Glooko Uploader لمتابعة تحميل بيانات الجهاز.

المرضى ومقدمو الرعاية الصحية

6 ميزات Glooko Uploader

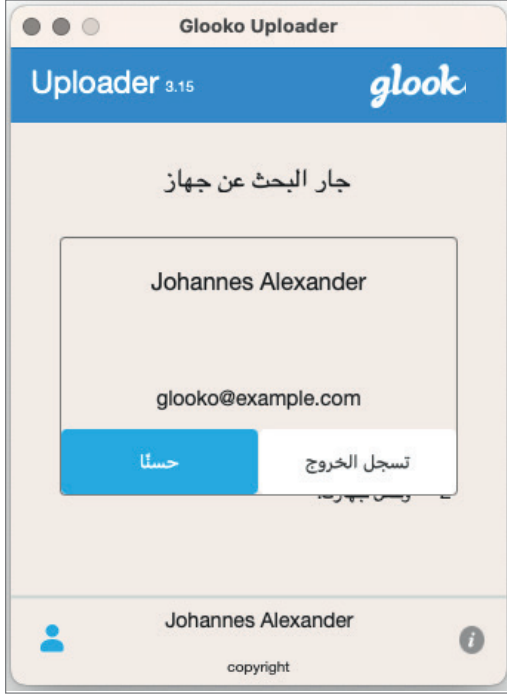

تسجيل الخروج من حسابك

- يمكنك تسجيل خروجك من حساب Glooko من خلال الضغط على زر ملف التعريف في الزاوية السفلية اليمنى في Glooko Uploader.
- اضغط على تسجيل الخروج

عرض معلومات ملف التعريف

- يمكنك عرض معلومات ملف تعريفك من خلال الضغط على زر ملف التعريف في الزاوية السفلية اليمنى من Glooko Uploader.
- تتضمن هذه النافذة المنبثقة ما يلي:
 - اسمك
 - موقعك الرئيسي المعتمد (كمقدم رعاية صحية) ورمز ProConnect المرتبط به
 - عنوان بريدك الإلكتروني
- اضغط على تسجيل الخروج.



الاطلاع على معلومات إضافية حول GLOOKO UPLOADER

- يمكنك عرض معلومات إضافية من خلال الضغط على زر المعلومات i في الزاوية السفلية اليسرى من Glooko Uploader.
- تتضمن هذه النافذة المنبثقة معلومات حول دعم المنتج ووصف المنتج وبيان الاستخدام المقصود.

المرضى ومقدمو الرعاية الصحية

7 تحميل بيانات مرض السكري

عندما تسجل دخولك إلى Glooko Uploader، يمكنك تحميل بيانات جهاز مرض السكري.

توصيل كابل جهاز مرض السكري بالكمبيوتر

بعد تسجيل دخولك، سيبدأ Glooko Uploader بالبحث عن جهاز.

- قم بتوصيل كابل USB أو كابل الأشعة تحت الحمراء (IR) الذي يناسب جهاز مرض السكري بالكمبيوتر.
- عندما يتم التعرف على الكابل، انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم التعرف على برامج تشغيل الكابلات قبل توصيل الجهاز.



توصيل جهاز مرض السكري بالكابل

- بعد توصيل الكابل بالكمبيوتر، قم بتوصيل جهاز مرض السكري بالكابل.

ملاحظة: تأكد من استخدام الكابل المرفق بجهاز مرض السكري. إذا احتجت إلى الحصول على كابل جديد، فيرجى الاتصال بشركة تصنيع جهاز مرض السكري.

- بعد توصيل جهاز مرض السكري بالكمبيوتر بواسطة الكابل المرفق بالجهاز، سيبدأ جهازك بتحميل البيانات باستخدام Glooko Uploader.
- إذا تلقيت رسالة خطأ، فيرجى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحل الخطأ. إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات، فيرجى الاتصال بفريق الدعم من Glooko للحصول على المساعدة.



المرضى ومقدمو الرعاية الصحية

8 عرض بيانات مرض السكري


بعد تحميل بيانات جهاز مرض السكري باستخدام Glooko Uploader، يمكنك عرض البيانات على الموقع <https://my.glooko.com> من خلال تسجيل دخولك إلى حساب Glooko.

• المرضى:


لمعرفة المزيد حول لوحة معلومات MyGlooko Web، يرجى الرجوع إلى [دليل البدء السريع لاستخدام Glooko الشخصي](https://support.glooko.com) المتوفر عبر <https://support.glooko.com>

• مقدمو الرعاية الصحية:

لمعرفة المزيد حول Population Tracker، يرجى الرجوع إلى: [Glooko لأغراض العيادات - دليل البدء السريع](https://support.glooko.com) المتوفر عبر الموقع <https://support.glooko.com>

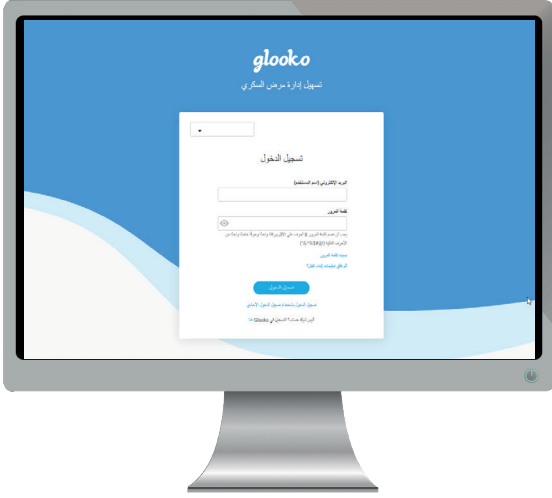

الأجهزة المتوافقة وطرق الإرسال

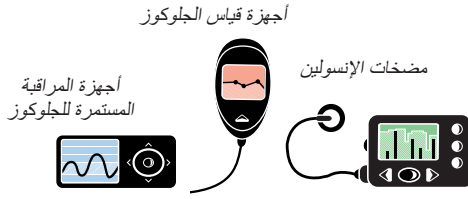

في ما يلي تعليمات حول كيفية تحميل بيانات مرض السكري إلى Glooko باستخدام Glooko® Uploader. ما لم يتم توفير تعليمات تحميل صريحة للجهاز، ستضطر ببساطة إلى توصيله بالكمبيوتر الشخصي/جهاز Mac بواسطة كابل USB المحدد الخاص به، وسيتم تحميله تلقائيًا.

يُرجى أخذ العلم بأن بعض أجهزة مرض السكري قد لا تكون متوفرة في السوق التي تشتري منها. 

أجهزة قياس جلوكوز الدم – متصلة بكابل USB

Abbott



Abbott FreeStyle USB
(م 2,5)

FreeStyle Lite

FreeStyle Freedom Lite



مايكرو USB

Neo
FreeStyle Optium Neo

FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Precision



Abbott Xceed
USB

Precision Xtra

Precision Xceed

تحتصر Abbott التوافق في السويد والنرويج.

ملاحظة: في أثناء عملية تثبيت برنامج Glooko Uploader، تأكد من تحديد أنك تستخدم برنامج FreeStyle Libre. سيؤدي ذلك إلى تثبيت FreeStyle Libre DataHub الإضافي المطلوب لعمليات التحميل هذه.



مايكرو USB

FreeStyle Libre 3 Reader

FreeStyle Libre Reader
FreeStyle Libre 2 Reader

Acon Laboratories



On Call USB
(م 2,5)

On Call® Extra Voice
On Call® Sure
On Call® Sure Sync

On Call® Express
On Call® Express II
On Call® Express Voice
On Call® Extra

Activmed



مايكرو USB

GlucoCheck Gold (TD-4289)

Agamatrix



Agamatrix USB

WaveSense Jazz



مايكرو USB

Ally BGK



USB i-Sens
(م 2,5)

Ally BGM



Infopia J USB
(م 2,5)

Infopia

Finetest Lite

أجهزة قياس جلوكوز الدم – متصلة بكابل USB

Animas

OneTouch Ping
(جهاز قياس)



ميني USB

1. قم بالتوصيل بالكمبيوتر.
2. اضغط على زر الطاقة في جهاز القياس.

Arkray

Glucocard Shine XL



i-Sens J USB
(م 2,5)

- قم بالتوصيل والضغط على أي زر.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express



مايكرو USB

(BLE) ReliOn Premier Blu
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice



i-Sens J USB
(م 2,5)

- قم بالتوصيل والضغط على أي زر.

Ascensia (Bayer)

Contour Plus | Breeze 2



1. قم بالتوصيل بالكمبيوتر.
2. اضغط على زر الطاقة في جهاز القياس.

Contour TS | Contour
Contour XT | Contour link
Contour next EZ

1. قم بالتوصيل بالكمبيوتر.
2. اضغط على زر **M** في جهاز القياس.



منفذ USB على جهاز
القياس

Contour next USB
Contour USB

Contour next link
Contour next link
2.4



مايكرو USB

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
(Bluetooth) Contour Next
Contour Next Gen

Diaetesse

(XPER (TD-4289B



مايكرو USB

أجهزة قياس جلوكوز الدم – متصلة بكابل USB



أجهزة قياس جلوكوز الدم – متصلة بكابل USB

Intuity



مايكرو USB

POGO® Automatic™

LifeScan

قم بالتوصيل والضغط على أي زر.



LifeScan J USB
(مم 3,5)

UltraEasy
OneTouch UltraMini

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra 2
OneTouch



مايكرو USB

OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus
Reflect



ميني USB

OneTouch

OneTouch Verio IQ
Verio Sync

Menarini



Menarini GlucoMen areo J USB
(مم 2,5)

2K
GlucoFix Tech

GlucoMen areo
GlucoMen areo

إذا عرض جهاز القياس: **E-3**، فافصله وانتظر حتى يتوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد توصيل جهاز القياس.



Menarini J USB
(مم 3,5) blue

GlucoMen LX2

Nipro



مايكرو USB

4SURE Smart Duq

4SURE Smart

Trividia (Nipro)

قم بتوصيل جهاز القياس ووضعه في محطة الإرساء.



قاعدة USB من Nipro

TRUE METRIX AIR
TRUEyou mini

TRUEresult
TRUE METRIX

Beurer




مايكرو USB

GL 49
GL 60


GL 44
GL 48

أجهزة قياس جلوكوز الدم – متصلة بكابل USB

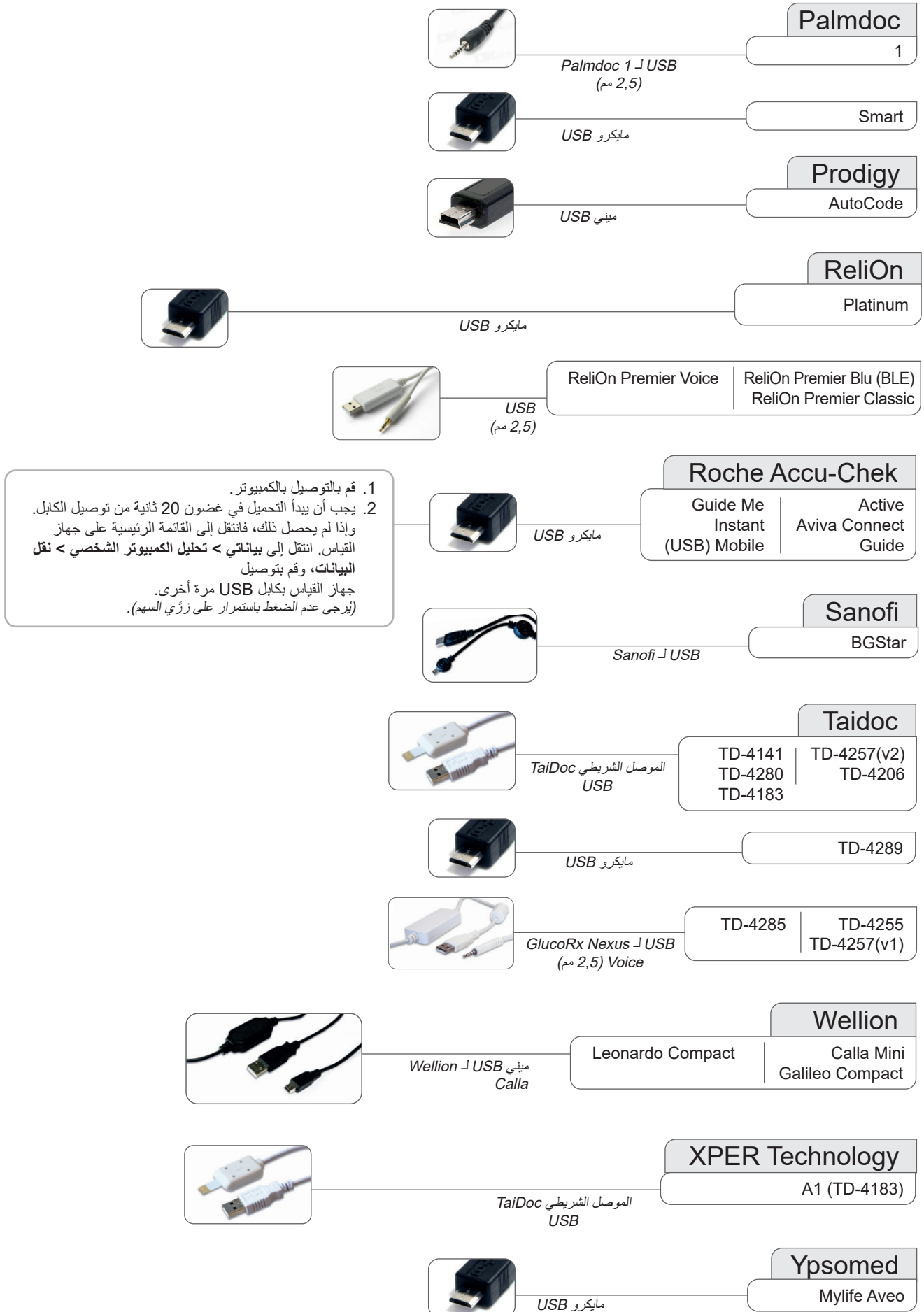




أجهزة قياس جلوكوز الدم – مزودة باتصال الأشعة تحت الحمراء

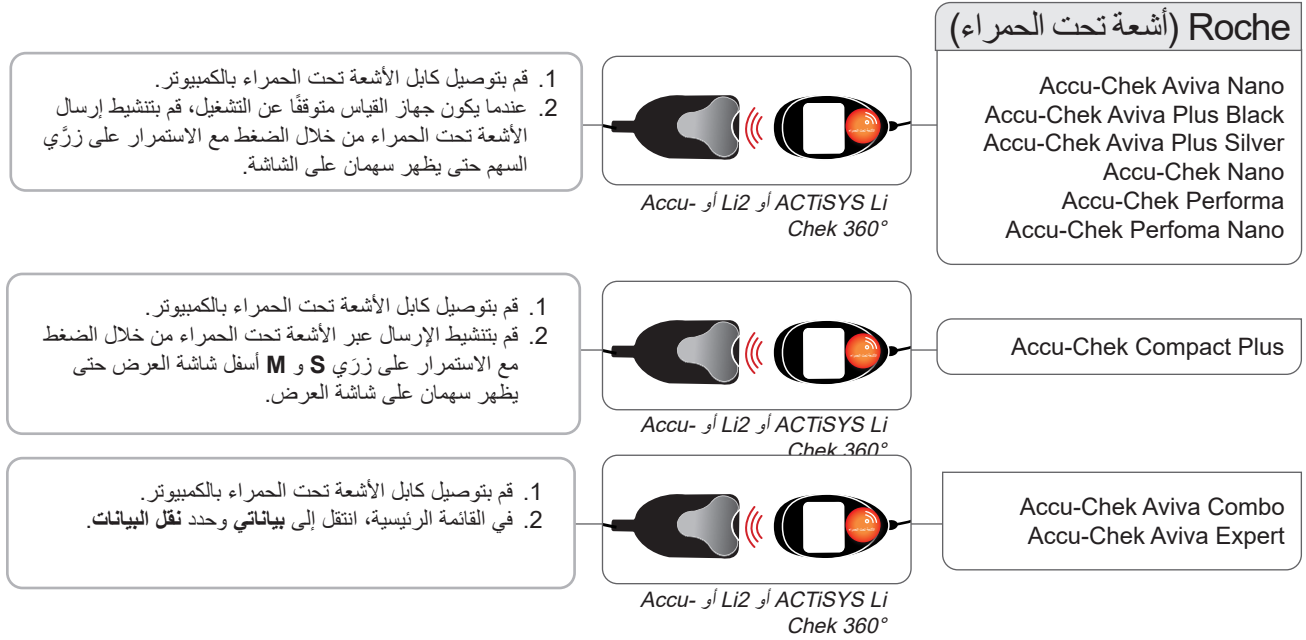


أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز - متصلة بكابل USB

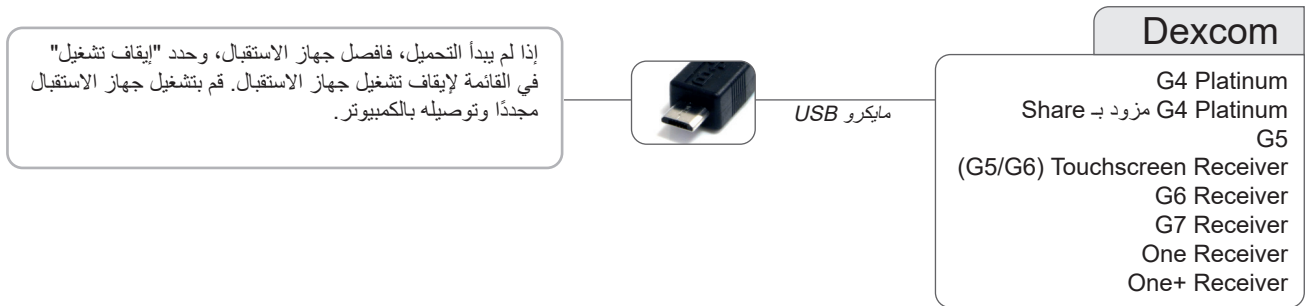

أجهزة قياس جلوكوز الدم ومضخات الإنسولين - مزودة باتصال NFC

1. قم بتوصيل لوحة NFC التي توفرها Terumo بالكمبيوتر.
2. ضغ على جهاز القياس فوق لوحة NFC.
يرجى ملاحظة أنه يجب محاذاة رمز الإرسال على الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد مع رمز NFC على لوحة NFC.

Terumo
Medisafe Fit Smile

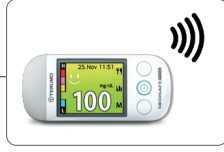

1. قم بتوصيل لوحة NFC التي توفرها Terumo بالكمبيوتر.
2. تأكد من ظهور القائمة الرئيسية على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالمضخة.
3. ضغ على جهاز التحكم عن بُعد فوق لوحة NFC.
يرجى ملاحظة أنه يجب محاذاة رمز الإرسال على الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد مع رمز NFC على لوحة NFC.

Medisafe WITH





مضخات الإنسولين - مزودة باتصال الأشعة تحت الحمراء

1. قم بتعليق عمل المضخة. (القائمة الرئيسية، قم بالتمرير إلى تعليق/استئناف واضغط على موافق؛ سيتم تمييز التعليق).
2. اضغط على موافق.
3. وجه الجهة الخلفية من المضخة نحو كابل التنزيل اللاسلكي من Actisys الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
4. عند انتهاء الإرسال: قم باستئناف عمل المضخة (القائمة الرئيسية، مرر إلى تعليق/استئناف واضغط على موافق؛ سيتم تمييز استئناف). اضغط على موافق.

Animas
(أشعة تحت الحمراء)
OneTouch Ping Vibe



Li2 أو ACTiSYS Li
ملاحظة! إذا كنت تستخدم Windows 8 أو 10، فستحتاج إلى استخدام كابل ACTiSYS Li2

كابلات الأشعة تحت الحمراء المتوافقة



Roche Accu-Chek Smart Pix 2



أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X : 10.14-12.0
Windows : 8 و 10

Accu-Chek - كابل 360 درجة (Realtyme)




أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X : 10.14-12.0
Windows : 8 و 10

ACTiSYS - كابل Li2



أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X : 10.14-12.0
Windows : 8 و 10

ACTiSYS - كابل Li

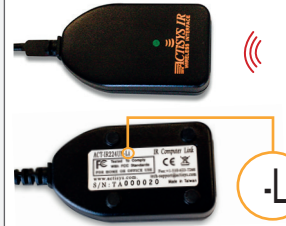

أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X : 10.14-12.0
Windows : غير متوفر



مضخات الإنسولين – متصلة بكابل USB

Equil/Wellion

MICRO-pump



مايكرو USB

Insulet

نظام Omnipod®



ميني USB

نظام Omnipod® Dash™



مايكرو USB

1. قم بالتوصيل واضغط على زر الطاقة في جهاز PDM.
2. الغ فقل جهاز PDM واضغط على "تصدير" على الشاشة.

Medtronic

670G	630G
	640G

1. قم بتوصيل جهاز القياس Contour Next Link 2.4 بأحد منافذ USB في الكمبيوتر.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتي يتم عرضها في Glooko Uploader لتحميل البيانات من مضخة Medtronic.

منفذ USB على جهاز القياس

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo



مايكرو USB

1. افتح القائمة الرئيسية الموجودة على وحدة اليد في المضخة.
2. حدد "USB" في القائمة الرئيسية.
3. قم بتوصيل وحدة اليد بالكمبيوتر باستخدام كابل مايكرو USB.

Tandem

t:slim G4	t:flex
t:slim X2	t:slim



مايكرو USB

Vicentra

Kaleido



مايكرو USB

انتقل إلى القائمة الصفراء واختر تحميل البيانات.

مضخات الإنسولين - متصلة بكابلات الأشعة تحت الحمراء

كابل Roche Accu-Chek
Smart Pix 2




كابل Roche Accu-Chek
Smart Pix



كابلات الأشعة تحت الحمراء المتوافقة

1. قم بتوصيل كابل Smart Pix 2 بجهاز الكمبيوتر وانتظر حتى يبدأ المؤشر الأزرق على جهاز Smart Pix 2 بالوميض ببطء.
2. قم بتوصيل وحدة Smart Pix 2 المحمولة باليد باستخدام كابل مايكرو USB.
3. في قائمة الوحدة المحمولة باليد، حدد **الاتصال بالكمبيوتر واضغط على موافق**.
4. تأكد من أن المضخة موجودة ضمن نطاق الوحدة المحمولة باليد.
5. يكون المؤشر الأزرق على Smart Pix 2 مضاءً أثناء إرسال البيانات من الجهاز إلى Smart Pix 2.
6. يتوقف المؤشر الأزرق عن التشغيل تلقائيًا ويصدر كل من Smart Pix 2 والجهاز صوتًا للإشارة إلى أن البيانات يتم إرسالها من Smart Pix 2 إلى Glooko Uploader.
7. لا تفصل Smart Pix 2 بعد! انتظر حتى يؤكد Glooko Uploader نجاح التحميل.

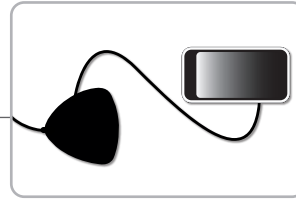


Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa
Insight

Smart Pix 2

ملاحظة! قم بتوصيل جهاز تحكم المضخة بجهاز Smart Pix 2 بواسطة كابل مايكرو USB.

1. قم بتوصيل كابل Smart Pix بجهاز الكمبيوتر لديك وانتظر حتى يبدأ المؤشر الأزرق على جهاز Smart Pix بالوميض ببطء.
2. ضع المضخة في وضع **نقل البيانات** (أوقف عمل المضخة ثم ادخل إلى قائمة **نقل البيانات**).
3. وجّه العين التي تصدر الأشعة تحت الحمراء في المضخة نحو Smart Pix. يشير المؤشر الأزرق إلى إرسال البيانات إلى Smart Pix.
4. انتظر حتى يبدأ المؤشر الأزرق بالوميض ببطء من جديد أو يتوقف عن الوميض تمامًا.
5. يتم الآن إرسال البيانات من Smart Pix إلى Uploader.
6. لا تفصل Smart Pix بعد! انتظر حتى يقوم Uploader بالإشارة إلى نجاح التحميل.

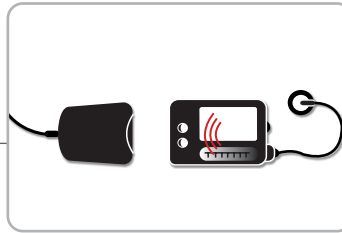

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix 2 أو Smart Pix

ملاحظة! يلزم توفر الإصدار 3.02 أو أحدث من برنامج Smart Pix عند استخدام Smart Pix.

الدعم
help@glooko.com
https://support.glooko.com

Glooko Inc 
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

